



Relief Core

Varmebælte

-39° 07' N
21° 43' E

PRODUKTINFORMATION	01
HVAD ER INKLUDERET	02
DEL-OVERSIGT	03
BETJENING AF ENHEDEN	04
OPLADNING	05
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	06
ADVARSEL & SIKKERHED	07

INDHOLD SOVERSIGT



Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende opsætning eller brug af dit Relief Core Varmebælte fra Polax, kan du altid skrive til os på **info@polax.dk**. Alternativt kan du se vores oftest stillede spørgsmål og læse mere på vores hjemmeside.

Produktinformation

Tak fordi du valgte **Relief Core Varmebæltet fra Polax**. Vi håber, du bliver glad for dit køb. Læs venligst denne vejledning grundigt inden brug og gem den til fremtidig reference. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@polax.dk.

Parameter	Specifikation
Model	Relief Core Varmebælte
Varmefunktion	4 niveauer: 40 / 45 / 50 / 55°C (±3°C)
Vibrationsprogrammer	Integreret / Afspænding / Beroligende / Restitution
Infrarød bølgelængde	660nm + 850nm (4 intensitetsniveauer)
Driftstid pr. session	15 minutter (automatisk slukning)
Opladningsstik	USB Type-C

Hvad er inkluderet i pakken?

1 stk.

Relief Core Varmebælte



1 stk.

Forlænger-rem



1 stk.

USB Type-C ladekabel




1 stk.

Brugermanual (QR)




Del-oversigt & Betjening


Yderside af enheden:

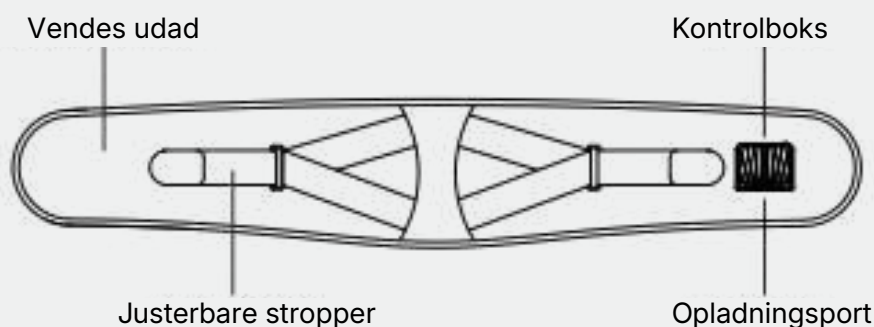

Inderside af enheden:

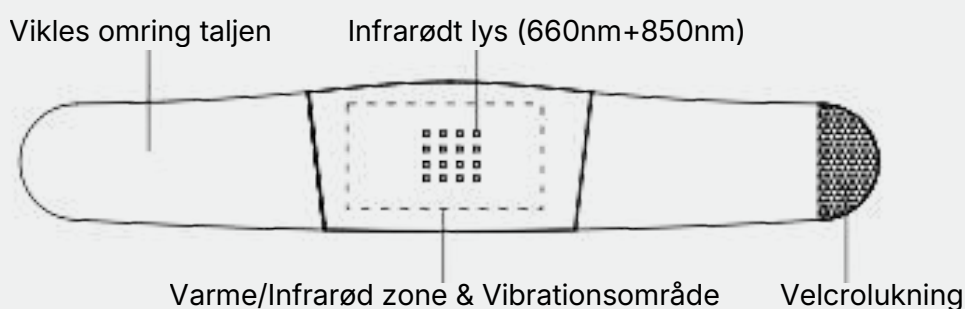

Kontrolboks:

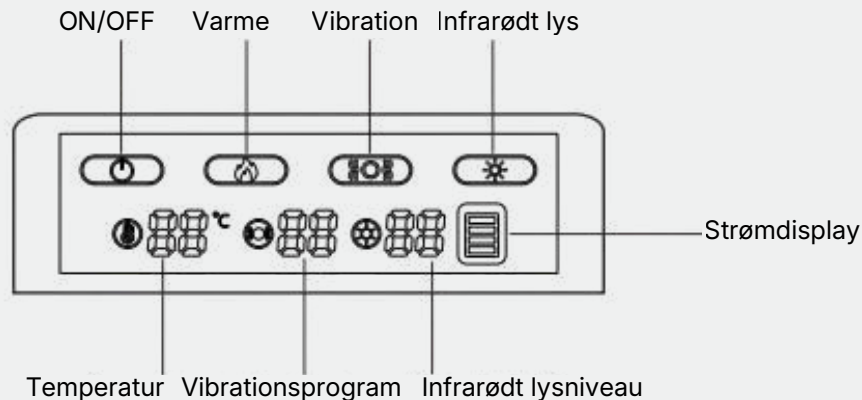

Tænd/sluk-knap

Tryk og hold nede for at tænde og slukke enheden.

Varmeknap

Skifter mellem 4 varmeniveauer: 40°C / 45°C / 50°C / 55°C ($\pm 3^\circ\text{C}$).

Vibrationsknap

Skifter mellem 4 vibrationsprogrammer: Integreret / Afspænding / Beroligende / Restitution.

Infrarød lysknap

Skifter mellem 4 lysniveauer (lav til høj intensitet, 660nm+850nm).

Strømdisplay

Viser aktuel batteristatus.



Opladning af enheden

01 Tilslut ladekablet

Sæt USB Type-C kablet (medfølger) i opladningsstikket i bunden af kontrolboksen på enheden.

02 Tilslut til strøm

Sæt den anden ende af kablet i en strømadapter og tilslut adapteren til stikkontakten.

03 Opladningsindikator

Når opladningen starter, vises et lyseffekt på strømdisplayet på kontrolboksen.

04 Fuld opladning

Enheden er fuldt opladet efter 4-5 timers kontinuerlig opladning. Når batteriet er fuldt, ændres indikatoren. Frakobl herefter ladekablet fra enheden.

05 Under opladning

Brug IKKE enheden mens den oplades.

Tips til den bedste oplevelse

- Bær bæltet direkte på huden eller et tyndt stof for optimal varme- og vibrationseffekt
- Start på laveste varme- og vibrationsniveau, og juster gradvist op efter.
- En session varer op til 15 minutter - genstart enheden for at fortsætte.
- Anbefalet brug: 1-2 sessioner dagligt.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	Relief Core Varmebælte
Dimensioner	1155 mm × 205 mm × 65 mm
Nominel effekt	60W
Batterikapacitet	7,4V / 2200mAh
Opladningsspænding	5V = 2A
Opladningsstik	USB Type-C
Vægt	780g
Varmefunktion	4 niveauer: 40 / 45 / 50 / 55°C (±3°C)
Vibrationsprogrammer	Integreret / Afspænding / Beroligende / Restitution
Infrarød bølgelængde	660nm + 850nm (4 intensitetsniveauer)
Driftstid pr. session	15 minutter (automatisk slukning)
Certificeringer	CE, FCC, RoHS



ADVARSEL OG SIKKERHED

DK

Generelle advarsler

- Brug ikke enheden i nærheden af vand, fugt eller antændelige materialer.
- Brug ikke enheden i miljøer med høj elektromagnetisk stråling, høj temperatur eller fugt.
- Forsøg ikke selv at adskille enheden. Kontakt Polax kundeservice ved fejl eller behov for vedligeholdelse.
- Tilslut og frakobl ikke USB-ladekablet med våde hænder – risiko for elektrisk stød.
- Brug kun enheden til massageformål som beskrevet i denne vejledning.
- Enheden må ikke benyttes af personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne uden opsyn.
- Giv ikke enheden til børn eller personer uden evne til at give udtryk for ubehag.
- Anvend med forsigtighed, hvis du er følsom over for høj temperatur, vibration eller infrarødt lys
- Brug ikke enheden ved: graviditet, høj feber, maligne tumorer, hjertesygdom, akut sygdom.
- Enheden indeholder lithiumbatteri – adskil ikke, modificer ikke og kast ikke i ild.
- Bortskaf enheden i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter.





POLAX

CREATE YOUR MOMENTS

 polax

 polax_nordic

 polax_nordic