

osmo

MICROLITE USER MANUAL





ELEKTRISKA NANOKRISTALLER SKÖNHETSINSTRUMENT

MICROLITE LADDAR OCH KOPPLAR IN ALLT I EN MASKIN



1. Chip installation
2. Vridratt för att justera nålens höjd
3. Kugghjulsdisplay
4. Tryck länge på strömförsörjningen i 1,5 s för att slå på mikrokristallomkopplaren
5. Nätsladd Android gränssnitt plug in instrument



Instrumentet ska vara vattentätt, släpp inte in vätska i instrumentet. Bomullsservetter finns tillgängliga efter operation. Rengör insidan av instrumenthylsan för att förhindra att essensvätskan rinner in i instrumentet och orsakar stopp.

GUIDE TILL ANVÄNDNING AV NANOELEKTRISKT SKÖNHETSINSTRUMENT

APPLIKATIONSANVISNING ALLMÄN UTGÅVA

Steg 1 Tvätta ansiktet
normalt



Steg 2 Smörj ut
essens/andra
hudvårdsprodukter,
alkoholfri hudvårdsprodukt




Steg 3 Använd mikronålen för
att göra cirklar runt ditt
ansikte, du kan skjuta eller
knacka



Steg 4 Applicera en mask i
15-20 minuter med
alkoholfri mask utan tvätt



Steg 5 Applicera en kräm för
att låsa in näringsfuktighet
Alkoholfri no wash mask

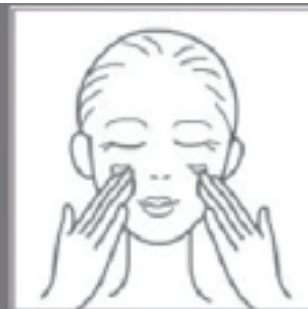

Vanliga frågor före användning

händer och ansikte bör rengöras noggrant. Händerna ska rengöras med handlotion eller tvål. och ansiktet ska rengöras med ansiktsrengöring eller rengöringsmedel.

Chipsen är sterila och behöver inte steriliseras.

Normalt är 2 gånger i veckan, nagelbandet tunt kan han 1 gång i veckan.

Detta rekommenderade att importera oberoende engångsförpackningsprodukter med relativt enstaka komponenter, såsom frystorkat pulver, rå vätska (hyaluronsyra, VC), vatten och lätta, fuktgivande maskpastaprodukter.

Innan du introducerar funktionella produkter bör produkten introduceras på ett litet område bakom örat, och huden kommer inte att ha allergiska symtom som rodnad, svullnad och klåda. Applicera sedan på hela ansiktet.

Lagring

1. Håll rent och torrt, förvara i en välventilerad miljö, undvik exponering för hög temperatur, fukt, vikt och stötar.
2. Placera inte på en plats där barn kan nå, borta från barn.
3. Ta bort det nanokristallina chipet när du förvarar mikrokristallen.

Vanligt problem vid användning

1. Hur använder man importmetoden?

Vid användning bör vi se tjockleken och uthålligheten hos hudens nagelband, och poängen med dålig uthållighet, stark uthållighet och nagelband Tjocka slips används vanligtvis i områden som ögon, panna, muntriangel, kindben eller nacke eftersom det finns mindre subkutant fett kom med förslag.

2. Hur styr man timingjustering och styrka?

Tiden för första användning rekommenderas att vara mindre än 0,5, senare kan anpassas efter sin egen situation, först gerlt berör huden. Med förbehåll för hudkänsla, Inget obehag kan vara något ökad styrka.

3. Hur tar man in olika produkter?

Essens: efter att ha applicerat essensen i ansiktet, applicera den vertikalt på huden med nanokristaller Ansiktsintroduktion, kan också smetas ut sidan import.

4. C:an jag använder flera produkter samtidigt?

Det rekommenderas att inte lägga mer än två produkter åt gången, och huden med dålig tolerans kan bara importera en produkt åt gången.

Vanliga problem efter användning

1. Behöver jag applicera andra hudvårdsprodukter efter import?

Det rekommenderas att använda en fuktgivande eller reparerande mask efter import. Om huden är torr kan den kombineras med fuktkräm eller kräm.

2. Kan du röra vid vattnet? Kan jag tvätta ansiktet och sminka mig dagen efter?

Det rekommenderas att importera på natten, rör inte vattnet dagen efter importen, om det inte finns några obehagssymptom som rodnad, svullnad, torr klåda och så vidare dagen efter är det ok Normal hudvård och smink, om obekväma symptom, använd grundläggande fuktgivande produkter.

3. Kan du njuta av solen, kryddig mat, skaldjur och vin?

Det rekommenderas att inte utsättas för solen inom tre dagar, äta mindre kryddig, skaldjur, vin och andra stimulerande föremål.

4. Kan chippet återanvändas?

Chipet är engångsbruk och oxiderar när det öppnas. Efter användning fastnar chipet på keratin och hår eller huden Bakterier föder upp och återanvändning rekommenderas inte.

Användningssteg

1, rengör först huden; Daglig sminkborttagning, rengöring, hudtoner kan användas för sekundär rengöring, ta bort nanochippet Monteras på toppen av mikrometern.

2. Applicera rätt mängd originalvätska eller essens i ansiktet.

3. Tryck länge på strömbrytaren i 3 sekunder för att starta mikrokristallen och röra vid huden vertikalt. Det rekommenderas att stöta vid varje kontaktpunkt 3,5 sekunder.

4. Efter operationen, stäng av strömmen och ta bort den nanokristallina chipet. Applicera vanliga hudvårdsprodukter. Kräm etc. (Awasch-in mask innan du applicerar hudvårdsprodukter fungerar bäst).

5. nanokristallina chips kan inte återanvändas för att eliminera sekundär förorening, kassera efter användning.

Operationsmetod för mikrokristallinstrument

1. Klappa och lyft ansiktet:

Efter att den nanokristallina skivan har installerats placeras den vertikalt på hudytan, Lätt fördjupning, hastighet, Tät: försiktigt upp och ner ett lyft, justera styrkan.

2. Glidningsmetod:

Efter att den nanokristallina skivan har installerats på hudens yta, kan en lätt depression observeras visuellt i en rak linje. När de glider bör nanokristallerna inte lämna hudytan, och det rekommenderas att stanna på samma del i 3,5 sekunder högst 2 gånger.

3. Cirkelmetod:

Efter att nanochipset har installerats på hudens yta kan den konkava känslan detekteras visuellt och nanochipset kan absorberas i små cirklar med konstant hastighet. Riswafern ska inte lämna hudytan. Det rekommenderas att stanna på samma plats i 3-5 sekunder och inte mer än 2 gånger.

Försiktighetsåtgärder

Anmärkningar för nanoelektriska mikrokristallinstrument:

1. Ta inte bort eller modifiera laddningsenheten och mikrokristallen. Det är strängt förbjudet att använda laddaren när strömförsörjningen först är skadad. Annars kan det leda till elektriska stötar, brand- och laddningsskador.

2. Rör inte USB-laddningskabeln med våta händer. Om laddningskabeln vidrör någon annan vätska i eld eller vatten, stäng av strömmen omedelbart.

3. Ingen kortslutningsladdningsenhet, inga mekaniska vibrationer eller skakinstrument, inget direkt solljus, inget badrum och annan hög temperatur. Produkten är inte vattentät. det är strängt förbjudet att regna eller fukta.

4. Använd inte laddningen nära TV:n, radion och andra elektriska apparater. 5. Koppla in huvudet för att fokusera på laddning, dra i nätkabeln kommer att skada laddningsledningen, laddningen måste vara mikrokristall och laddningsledning. Användningen av ocertifierade laddningskablar kan vara farlig i ett ventilerat utrymme med en temperatur på -10°C +55°C Brott mot tillverkarens garanti. 6. Förvara instrumentet utom räckhåll för barn för att undvika fara.

Hudvårdsåtgärder

1. Hudvårdsprodukter måste vara säkra, effektiva, giftfria och lämpliga för sig själva.

Nanokristallin anmärkning:

1. Om engångsförpackningen är ofullständig eller trasig, använd den inte för att undvika hudinfektion

2. Rengör manöverdelar och händer före användning.

3. För första gången rekommenderas att göra ett hudtest på insidan av handleden kombinerat med hudvårdsprodukter, om det uppstår klåda osv.

Använd inte när det är känsligt.

4. Chippets styrka ska vara måttlig, och det är inte nödvändigt att trycka hårt på chippet eller lyfta handleden så att chipet inte kan röra jämnt i huden.

5. Cirka 10-20 minuter efter att ha använt nanokristallint chip kommer vissa personer att få hudrodnad, vilket är ett normalt fenomen. Om ja, försvinner larmet automatiskt inom 24 timmar.

6. Förutom chippet är andra portar på instrumentet förbjudna att komma i kontakt med vatten och andra vätskor, för att inte skada maskinen.

7. Samma chip kan endast användas av en person åt gången. Det är strängt förbjudet att dela samma chip med andra eller desinficera samma chip efter upprepad användning, annars kan det orsaka hudallergi, röda prickar, inflammation och andra negativa konsekvenser.

8. När du förvarar nanokristaller, kassera använda wafers och förvara de oöppnade wafers och mikrokristallerna i Håll väl ventilerad miljö borta från fukt, tryck och stötar, och förvara borta från barn.

9. Under användning ska den nanokristallina wältern fortsätta att röra sig och stanna i samma position i 3-5 sekunder, och antalet gånger bör inte överstiga 2 gånger

Försiktighetsåtgärder för mikronål

1. Användning av mikronålar: Rengör ansiktet --- Applicera produkten som ska introduceras på det drabbade området --- Använd mikronålarna i 10-15 minuter. Det rekommenderas att när du utför operationen för första gången, bör du försöka vara försiktig och kontrollera tiden till cirka 10 minuter (bara fäst den på området som ska göras, du behöver inte trycka hårt). Under operationen ska samma del inte användas i mer än 3 sekunder, och den del som ska göras ska gås fram och tillbaka 3 gånger. Ät inte skaldjur inom 3 dagar efter microneedling.
2. Innan du använder produkten rekommenderas det att applicera en liten mängd på huden bakom öronen och endast använda den om det inte finns någon rodnad eller klåda.
3. Efter operationen blir ditt ansikte lätt rött. Lätt sveda och lätt klåda är normala fenomen. Du kan applicera lugnande salva eller ismask för att lindra smärta.
4. Instrumentet ska vara vattentätt och låt inte vätska komma in i instrumentet. Vänd inte instrumentet upp och ner under drift. Essensvätska kan lätt rinna tillbaka från nålen in i rörkroppen, vilket gör att maskinen inte kan fungera.
5. Efter att ha använt mikronål, rör inte kranvatten under 6 timmar, eftersom bakterier lätt kan orsaka infektion. Du kan använda koksaltlösning, kallt kokt vatten eller ansiktsvatten för att torka ansiktet. För det andra rekommenderas inte tung smink.
6. Efter att ha använt mikronål, återfukta mer, återfukta mer, återfukta mer och skydda dig från solen.