

osmo

ORTHOVIVID USER MANUAL






För att läsa
bruksanvisningen på ett
annat språk,
gå till osmousermanual.com



Model	HF-6	Input	5V 1A
Material	ABS, PC	Vattentrycksintervall	40-110 psi
Laddningstid	3-5	Vattentät	IPX7
Kapacitet	timmar	Vattentryck	Pulsvatten


300 ML

Fittings

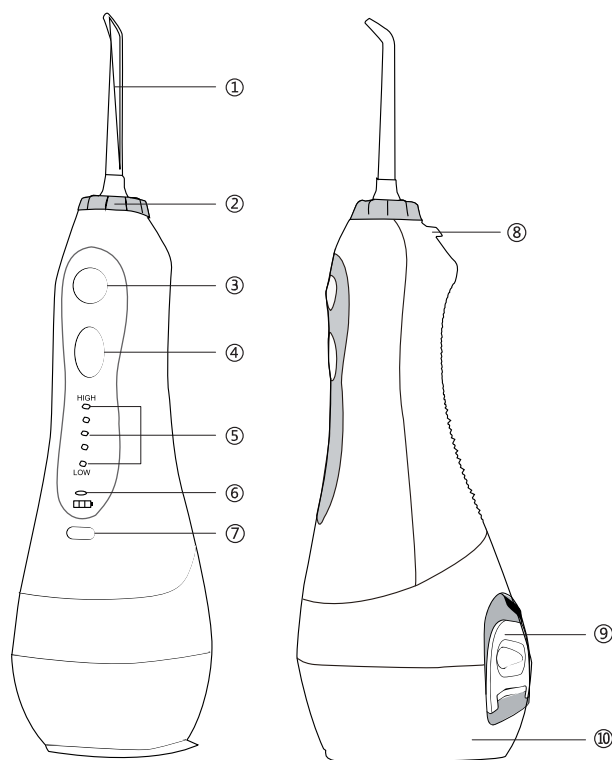

1. Nozzle tip
2. Tip rotation dial
3. Power button
4. Mode selection button
5. Mode indicator lights
6. Charging indicator light
7. Charging port
8. Tip release button
9. Water tank cap
10. Water tank

Accessories

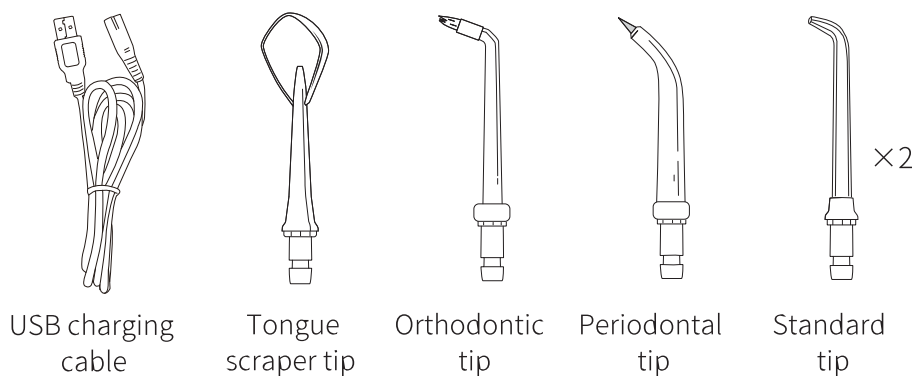

När du använder elektriska produkter, särskilt när barn är närvarande, bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

Hantera inte laddaren med våta händer.

Placera inte laddaren i eller släpp ner laddaren i vatten eller annan vätska. Kontrollera laddarens sladd för skador före första användningen och under produktens livslängd.

Använd denna produkt endast enligt anvisningarna i dessa instruktioner eller som rekommenderas av din tandläkare.

Använd endast tips och tillbehör som rekommenderas av OrthoVivid. Tappa inte eller för in något främmande föremål i någon öppning på produkten.

Håll laddningsenheten och sladden borta från uppvärmda ytor.

Använd inte denna produkt utomhus eller använd inte där aerosolprodukter (spray) används eller där syre administreras. Använd inte jod, koksaltlösning (saltlösning) eller vattenolösliga koncentrerade eteriska oljor i denna produkt. Användning av dessa kan minska prestandan och förkorta produktens livslängd.

Användning av dessa produkter kan upphäva garantin.

Fyll endast behållaren med vatten eller annan tandläkare rekommenderad lösning.

Ta bort alla orala smycken innan du använder denna produkt.

Använd inte om du har ett öppet sår på tungan eller i munnen.

Maintenance

Se till att kasta ut vattnet inuti tanken. och kör apparaten i 2 till 3 sekunder för att tömma vattnet efter användning. Annars kan bakterier samlas i det återstående vattnet. Sänk inte ner enheten i vatten eller annan vätska. Torka av utsidan vid behov med en mjuk trasa och ett milt, icke-slipande rengöringsmedel. Reservoiren kan tvättas med tvålatten. Tvätta bort smutsen inifrån med en borste eller liknande och torka av med en trasa. Torka av behållaren när den inte används under en längre tid.

Battery Care and Disposal

Enheten innehåller ett litiumbatteri. Vid slutet av batteritiden, tack återvinn enheten på din närmaste återvinningsstation enligt lokala eller statliga krav. Batteriet är inte utbytbar.

Warranty

OrthoVivid kommer att reparera eller byta ut (efter vårt val) din enhet kostnadsfritt i 12 månader från inköpsdatumet om apparaten är defekt i utförande eller material. Denna garanti täcker inte: skador på grund av felaktig användning, normalt slitage eller användning som defekter som har en försumbar effekt på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av obehöriga personer och om originaldelar från OrthoVivid inte används. För att erhålla service inom garantiperioden, lämna in eller skicka in hela apparaten med ditt inköpskvitto till en auktoriserad OrthoVivid-distributör/kundservicecenter i ditt land. Köparen är ansvarig för alla porto- och fraktkostnader och alla andra utgifter i samband med anspråk på denna garanti.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

Anslut inte denna enhet till ett spänningssystem som skiljer sig från det spänningssystem som anges på enheten eller laddaren. felaktig spänning kommer att skada produkten och Ogiltig garanti.

Om produkten öppnas/demonteras av NÅGON anledning är garantin Ogiltig.

Använd inte denna produkt om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller tappats i vatten.

Rikta inte vatten under tungan, in i örat, näsan eller andra ömtåliga områden. Denna produkt kan producera tryck som kan orsaka allvarlig skada i dessa områden.


Rikta inte vatten in i näsan eller örat. Den potentiellt dödliga amöban, *Naegleria fowleri*, kan finnas i en del kranvatten eller oklorerat brunnsvatten och kan vara dödlig om den riktas in i dessa områden.

Om din läkare rådde dig att få antibiotikapremedicinering före tandingrepp, bör du rådfråga din tandläkare innan du använder detta instrument eller något annat munhygienhjälpmedel.

Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används av, på eller nära barn eller handikappade.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.


Charging Unit Prior to First Use

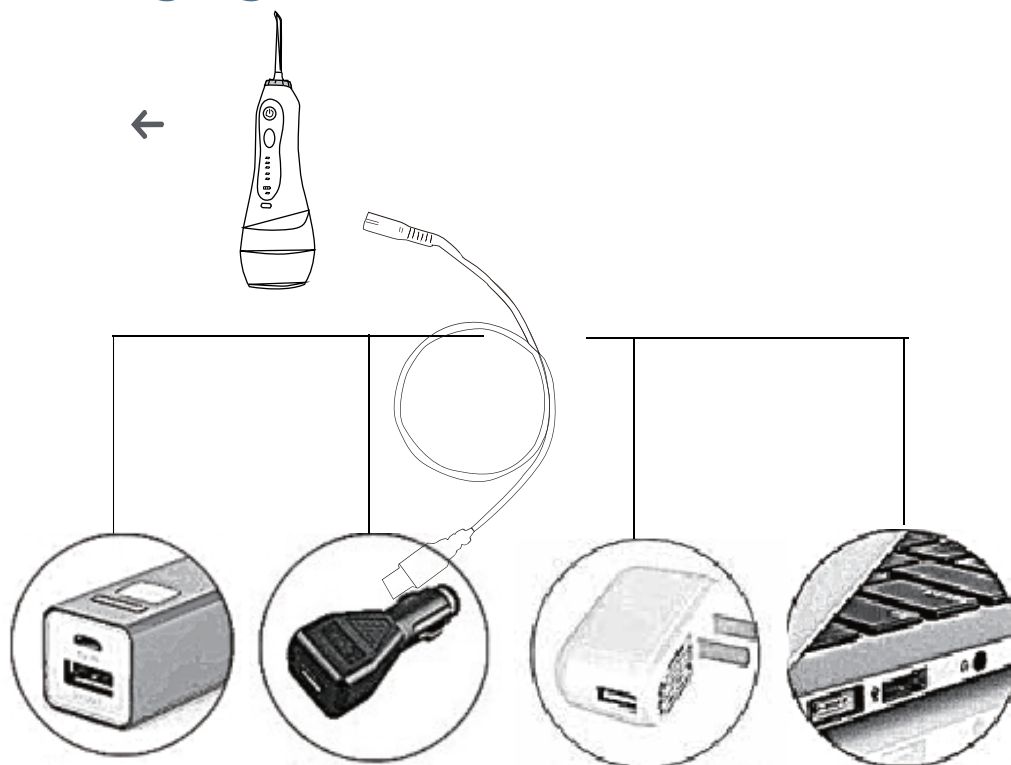

Denna produkt levereras inte med en AC/DC-laddare. Enheten laddas via enheter med 5V USB strömkapacitet såsom mobiltelefon, bärbar dator, USB vägg-laddare, etc. Laddningsindikatorn på handtaget blinkar under laddning och lyser kontinuerligt när enheten är fulladdad. En fullständig uppladdning tar 3-5 timmar.

Filling the Reservoir


Lyft flip top på behållaren och fyll behållaren med ljummet vatten.

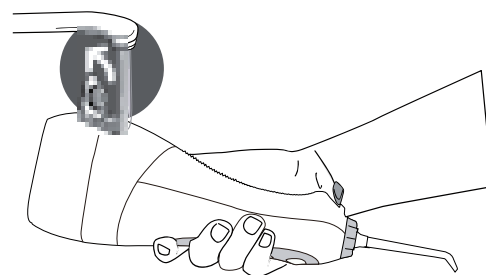

Inserting and Removing Tips


Sätt in spetsen i mitten av vredet överst på Water Flosser-handtaget. Tryck tills spetsen klickar på plats. För att ta bort spetsen från handtaget, tryck på spetsutmatningsknappen och dra spetsen från handtaget.

FÖRSIKTIGHET: Tryck inte på utmatningsknappen när enheten är igång.

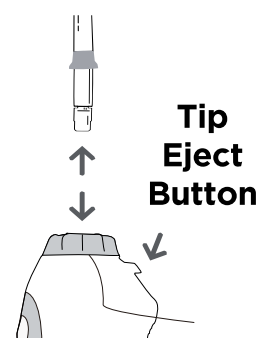

Adjusting the Pressure Setting

Du kan justera trycket på din Water Flosser genom att trycka på lägesknappen på handtaget. Börja med den lägsta försäljningen och öka efter din smak.

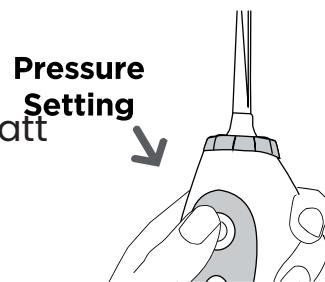


When Finished

Stäng av enheten. Töm eventuell vätska kvar i behållaren.


TIP USAGE

Jet Tip

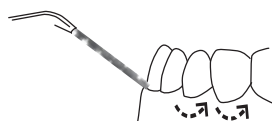


Varit över diskbänken och styr strålen till dina tänder och tandkött. Skjut handtagsomkopplaren uppåt för att starta vattenströmmen. Håll munnen lite öppen så att vattnet rinner ner i diskhon. Rikta vattenströmmen mot tandköttsskanten i 90 grader, så att kontakt skapas där tand och tandkött möts. Manövrera vattenflödet från tand till tand och kom ihåg att pausa kort mellan varje tand.

Periodontal Tip

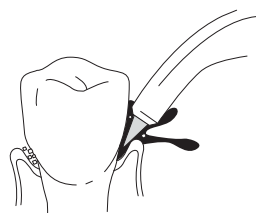

Placera tandköttsspetsen i kontakt mellan tänderna och tandköttsskanten. Luta den mjuka spetsen mot en tand i 45 graders vinkel och placera försiktigt spetsen 1/8" / under tandköttsskanten, i fickan. Starta spolningsapparaten genom att sälja den med lägsta tryck och rengör genom att försiktigt följa tandköttsskanten, föra in den parodontai spetsen mellan tänderna Fortsätt att spåra längs tandköttsskanten för att massera tandkötet och leverera lösningen säkert i tandköttsfickorna under tandköttsskanten.

Orthodontic Tip

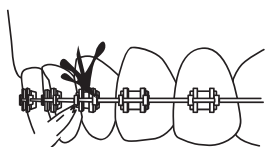

Använd den ortodontiska spetsen för att samtidigt borsta och skölja svåråtkomliga områden runt tandställning, kronor, broar och implantat. Börja på den sista molaren (bakre tanden). Placera spetsen i 90 graders vinkel mot tanden vid tandköttsskanten. Glid försiktigt spetsen längs tandköttsskanten, pausa en kort stund för att lätt borsta området mellan tänderna och runt tandregleringsfästet. Innan du fortsätter till nästa tand och utanför både de övre och nedre tänderna. Fortsätt processen tills du har rengjort insidan



Tongue Cleaner Tip

Luta huvudet över diskbänken. Skjut tryckknappen till den lägsta inställningen. Starta irrigatorn och placera tungrensaren på baksidan av tungan och flytta den framåt för att rengöra tungan. Upprepa för att täcka tungan. Ställ in trycket på den lägsta inställningen och justera till en gångjärnsinställning för mer vattentryck eftersom du känner bekvämt.

Troubleshooting

Problem	Cause	Corrective action
Reservoir leaks	Seal ring is abnormal	Remove the seal ring and reinstall
Low water pressure	Low battery	Recharge the device
	Nozzle head blocks	Replace with new nozzle heads
Lasts only few minutes with full charge	Dead battery	Contact retailers
	Charging cord	Try with new charging cable
	adapter broken	Try with new adapter
Motor makes sound but no water coming out	Nozzle head blocks	Replace with new tips
	Suction valve dislocation	Keep device on, fill water to the hole where nozzle head goes into
Motor doesn't make sound	Low Battery (Keep the device idle for more than 3 month))	Activate the battery by recharging it for 16 hours
Product stopped working suddenly	Overheating protection is activated (Continuous use 5 tanks of water with highest pressure)	Restart the device in 2 hour

If your problem still hasn't been fixed by above troubleshooting, please kindly contact with the retailers for help.

- ◆ Det kan uppstå under situationen när den här maskinen används för första gången eller lämnat den oanvänd under en längre tid:
Munstyckshuvudet sprutar inte vatten direkt efter att maskinen har slagits på. I detta fall, följ instruktionerna nedan för att få det att fungera:
Tillsätt lämplig mängd vatten på platsen där spetsarna sätts in.

Sätt in spetsen och tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.

- ◆ Vattentanken är löstagbar genom att helt enkelt dra i den. Det kan behöva ta lite kraft första gången för att ta bort det. Men efter det kommer det att bli mycket lättare.



osmo



För att läsa bruksanvisningen på ett annat språk,
gå till osmousermanual.com

Har du några frågor eller behöver du mer
hjälp?

Skicka ett mail till support@tryosmo.com så
hjälper vi dig gärna!