

# osmo

---

**MICROLIET  
HANDLEIDING**





**ELEKTRISCH SCHOONHEIDSINSTRUMENT MET  
NANOKRISTALLEN**

## GUIDE TO USE OF NANO ELECTRIC BEAUTY INSTRUMENT

### APPLICATION INSTRUCTION GENERAL EDITION

- Step 1  
Wash your face normally
- Step 2  
Smear essence/other skin care products, Non alcoholic skin care product
- Step 3  
Use the microneedle to make circles around your face, you can slide or tap



- Step 4  
Apply a mask for 15-20 minutes using Non-alcohol no wash mask

- Step 5  
Apply a cream to lock in nutrient moisture Non alcoholic no wash mask



# GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN NANO-ELEKTRISCH SCHOONHEIDSINSTRUMENT

## TOEPASSINGSINSTRUCTIE ALGEMENE EDITIE

Stap 1 Was je gezicht normaalhuidverzorgingsproducten,  
Alcoholvrij  
huidverzorgingsproduct



Stap 2 Smeer  
essence/andere




Stap 3 Gebruik de micronaald  
om cirkels rond je gezicht te  
maken, je kunt schuiven of  
tikken



Stap 4 Breng een masker  
aan gedurende 15-20  
minuten met behulp van een  
alcoholvrij wasmasker



Stap 5 Breng een crème aan  
om het voedingsvocht vast te  
houden. Alcoholvrij, geen  
wasmasker

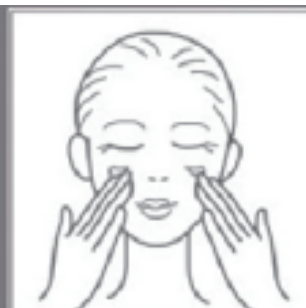

## Veelgestelde vragen vóór gebruik

hand en gezicht moeten grondig worden gereinigd. Handen dienen gereinigd te worden met handlotion of zeep. en gezicht moeten worden gereinigd met gezichtsreiniger of reiniger.

De chips zijn steriel en hoeven niet gesteriliseerd te worden.  
Normaal is 2 keer per week, nagelriemen dun kan 1 keer per week.

Dit adviseerde om onafhankelijke wegwerpverpakkingsproducten met relatief enkele componenten te importeren, zoals gevriesdroogd poeder, ruwe vloeistof (hyaluronzuur, VC), water en lichte, hydraterende maskerpasta-producten.

Voordat functionele producten worden geïntroduceerd, moet het product in een klein gebied achter het oor worden aangebracht, zodat de huid geen allergische symptomen zal vertonen, zoals roodheid, zwelling en jeuk. Breng het vervolgens op uw hele gezicht aan.

## Opslag

1. Schoon en droog houden, opslaan in een goed geventileerde omgeving, blootstelling aan hoge temperaturen, vocht, gewicht en schokken vermijden.
2. Plaats het apparaat niet op een plaats waar kinderen erbij kunnen, buiten het bereik van kinderen.
3. Verwijder de nanokristallijne chip wanneer u het microkristal opbergt.

## **Veelvoorkomend probleem bij gebruik**

### **1. Hoe gebruik ik de importmethode?**

**Bij gebruik moeten we de dikte en het uithoudingsvermogen van de cuticula van de huid zien, en het punt van slecht uithoudingsvermogen, sterk uithoudingsvermogen en cuticula. Dikke slips worden over het algemeen gebruikt in gebieden zoals de ogen, het voorhoofd, de monddriehoek, jukbeenderen of nek omdat er minder onderhuids vet is, suggesties doen.**

### **2. Hoe regel ik de timing en kracht?**

**Het wordt aanbevolen dat de tijd van het eerste gebruik minder dan 0,5 bedraagt. Deze kan later worden aangepast aan de eigen situatie, waarbij u eerst de huid lichtjes aanraakt. Afhankelijk van het gevoel van de huid, kan geen ongemak een licht verhoogde sterkte zijn.**

### **3. Hoe verschillende producten innemen?**

**Essentie: na het aanbrengen van de essence op het gezicht, breng deze verticaal op de huid aan met nanokristallen. Gezichtsintroductie, kan ook aan de zijkant worden uitgesmeerd.**

### **4. C:en gebruik ik meerdere producten tegelijk?**

**Het wordt aanbevolen om niet meer dan twee producten tegelijk te gebruiken, en de huid met een slechte tolerantie kan slechts één product tegelijk importeren.**

## Veel voorkomende problemen na gebruik

1. Moet ik na het importeren nog andere huidverzorgingsproducten gebruiken?

Het wordt aanbevolen om na het importeren een vochtinbrengend of herstellend masker te gebruiken. Als de huid droog is, kan deze worden gecombineerd met vochtinbrengende crème of crème.

2. Kun je het water aanraken? Kan ik mijn gezicht wassen en de volgende dag opmaken?

Het wordt aanbevolen om 's nachts te importeren, raak het water de dag na import niet aan, als er geen ongemakssymptomen zijn zoals roodheid, zwelling, droge jeuk enzovoort, de volgende dag is het ok Normale huidverzorging en make-up, als ongemakkelijke symptomen, gebruik dan basis vochtinbrengende producten.

3. Kun jij genieten van de zon, pittig eten, zeevruchten en wijn?

Het wordt aanbevolen om binnen drie dagen niet aan de zon te worden blootgesteld, minder pittig, zeevruchten, wijn en andere stimulerende voorwerpen te eten.

4. Kan de chip hergebruikt worden?

De chip is wegwerpbaar en oxideert bij opening. Na gebruik blijft de chip aan de keratine en het haar of de huid plakken. Bacteriën vermenigvuldigen en hergebruik wordt niet aanbevolen.

## Gebruiksstappen

1, reinig eerst de huid; Dagelijkse verwijdering van make-up, reiniging, huidtoner kan worden gebruikt voor secundaire reiniging, verwijder de nanochip gemonteerd op de bovenkant van de micrometer.

2. Breng de juiste hoeveelheid originele vloeistof of essentie aan op uw gezicht.

3. Druk de aan/uit-schakelaar gedurende 3 seconden lang in om het microkristal te starten en het huidoppervlak verticaal aan te raken. Het wordt aanbevolen om op elk contactpunt 3,5 seconden te wachten.

4. Schakel na de operatie de stroom uit en verwijder de nanokristallijne chip. Gebruik gewone huidverzorgingsproducten. Crème, enz. (Een uitwasbaar masker voordat u huidverzorgingsproducten aanbrengt, werkt het beste).

5. Nanokristallijne chips kunnen niet worden hergebruikt om secundaire vervuiling te voorkomen. Gooi deze na gebruik weg.

## Bedieningsmethode van microkristallijn instrument

### 1. Pat en til het gezicht op:

Nadat de nanokristallijne wafer is geïnstalleerd, wordt deze verticaal op het huidoppervlak geplaatst, lichte inkeping, snelheid, dicht: zachtjes op en neer liften, de sterkte aanpassen.

### 2. Glijmethode:

Nadat de nanokristallijne wafer op het huidoppervlak is geïnstalleerd, kan in een rechte lijn visueel een lichte depressie worden waargenomen. Tijdens het glijden mogen de nanokristallen het huidoppervlak niet verlaten en het wordt aanbevolen om maximaal 2 keer 3,5 seconden op hetzelfde onderdeel te blijven.

### 3. Cirkelmethode:

Nadat de nanochip op het huidoppervlak is geïnstalleerd, kan het concave gevoel visueel worden gedetecteerd en kan de nanochip met constante snelheid in kleine cirkels worden geabsorbeerd. De rijstwafel mag het huidoppervlak niet verlaten. Het wordt aanbevolen om 3 seconden op dezelfde plek te blijven en niet meer dan 2 keer.

## Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen voor nano-elektrisch microkristallijn instrument:

1. Verwijder of wijzig het oplaadapparaat en het microkristal niet. Het is ten strengste verboden om de oplader te gebruiken als de voeding eerst beschadigd is. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok. brand- en oplaadschade.
2. Raak de USB-oplaadkabel niet aan met natte handen. Als de laadkabel een andere vloeistof in vuur of water raakt. schakel onmiddellijk de stroom uit.
3. Geen kortsluitlaadapparaat, geen mechanische trillingen of schudinstrument, geen direct zonlicht, geen badkamer en andere hoge temperaturen. Het product is niet waterdicht. het is ten strengste verboden om te regenen of te vochtig te worden.
4. Gebruik de oplader niet in de buurt van tv, radio en andere elektrische apparaten. 5. Sluit de kop aan om je te concentreren op het opladen, trek aan het netsnoer. Dit beschadigt de oplaadlijn, het opladen moet microkristallijn zijn en de oplaadlijn. Het gebruik van niet-gecertificeerde oplaadkabels kan gevaarlijk zijn in een geventileerde ruimte met een temperatuur van  $-10^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}$  Schending van de fabrieksgarantie. 6. Bewaar het instrument buiten het bereik van kinderen gevaar te voorkomen.

## Huidverzorgingsvoorzorgsmaatregelen

1. Huidverzorgingsproducten moeten veilig, effectief, niet-giftig en geschikt voor zichzelf zijn.

Nanokristallijn Opmerking:

1. Als de wegwerpverpakking onvolledig of kapot is, gebruik deze dan niet om huidinfectie te voorkomen
2. Reinig de bedieningsonderdelen en handen vóór gebruik.
3. Het wordt aanbevolen om voor de eerste keer een huidtest uit te voeren aan de binnenkant van de pols in combinatie met huidverzorgingsproducten, als er jeuk optreedt, enz.

Niet gebruiken als het gevoelig is.

4. De sterkte van de chip moet matig zijn en het is niet nodig om hard op de chip te drukken of de pols op te tillen, zodat de chip de huid niet gelijkmatig kan raken.
5. Ongeveer 10-20 minuten na het gebruik van de nanokristallijne chip zullen sommige mensen roodheid van de huid krijgen, wat een normaal verschijnsel is. Zo ja, dan verdwijnt het alarm automatisch binnen 24 uur.
6. Behalve de chip mogen andere poorten van het instrument niet in contact komen met water en andere vloeistoffen, om de machine niet te beschadigen.
7. Dezelfde chip kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt. Het is ten strengste verboden dezelfde chip met anderen te delen of dezelfde chip te desinfecteren. Na herhaaldelijk gebruik kan dit huidallergie, rode vlekken, ontstekingen en andere nadelige gevolgen veroorzaken.
8. Wanneer u nanokristallen opslaat, gooit u de gebruikte wafers weg en bewaart u de ongeopende wafers en microkristallen in een goed geventileerde omgeving, uit de buurt van vocht, druk en schokken, en buiten het bereik van kinderen.
9. Tijdens gebruik moet de nanokristallijne walter in beweging blijven en gedurende 3-5 seconden in dezelfde positie blijven, en het aantal keren mag niet groter zijn dan 2 keer

## Voorzorgsmaatregelen voor micronaalden

1. Gebruik van micronaalden: Reinig het gezicht --- Breng het aan te brengen product aan op het getroffen gebied --- Bedien de micronaalden gedurende 10-15 minuten. Het wordt aanbevolen dat u, wanneer u de handeling voor de eerste keer uitvoert, voorzichtig te werk gaat en de tijd onder controle houdt tot ongeveer 10 minuten (plak het gewoon op het gebied dat moet worden uitgevoerd, u hoeft niet hard te duwen). Tijdens de operatie mag hetzelfde onderdeel niet langer dan 3 seconden worden gebruikt en moet het uit te voeren onderdeel 3 keer heen en weer worden gelopen. Eet geen zeevruchten binnen 3 dagen na microneedling.
2. Voordat u het product gebruikt, wordt aanbevolen een kleine hoeveelheid op de huid achter de oren aan te brengen en dit alleen te gebruiken als er geen roodheid of jeuk is.
3. Na de operatie zal uw gezicht licht rood zijn. Een lichte prikkeling en lichte jeuk zijn normale verschijnselen. U kunt verzachtende zalf of een ijsmasker aanbrengen om de pijn te verlichten.
4. Het instrument moet waterdicht zijn en er mag geen vloeistof in het instrument terechtkomen. Zet het instrument tijdens gebruik niet ondersteboven. Essentievloeistof kan gemakkelijk terugstromen van de naald in het buislichaam, waardoor de machine niet meer kan werken.
5. Raak na het gebruik van de micronaald gedurende 6 uur het kraanwater niet aan, omdat bacteriën gemakkelijk een infectie kunnen veroorzaken. U kunt een zoutoplossing, koud gekookt water of toner gebruiken om uw gezicht af te vegen. Ten tweede wordt zware make-up niet aanbevolen.
6. Nadat u de micronaald hebt gebruikt, moet u meer hydrateren, meer hydrateren, meer hydrateren en uzelf tegen de zon beschermen.