

# osmo

---

## EYEREST USER MANUAL





**[NENNSPANNUNG] DC 5 V**  
**[BATTERIEKAPAZITÄT] 1000 MAH**  
**PRODUKTGEWICHT 376 G**  
**\*1 USB-DATENKABEL \*1**

# Produkteinführung

Das intelligente Augenmassagegerät verfügt über modernste Mikrocomputer-Chip-Steuerungstechnologie, um die Augen zu kneten, zu vibrieren und mit Wärme zu komprimieren. Dieser vielschichtige Ansatz soll die Verspannungen der Augenmuskulatur lindern und ein umfassendes Gefühl von Komfort und Entspannung vermitteln.



Dieses Produkt richtet sich an Personen, die häufig Computer, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte nutzen. Um mit der Nutzung zu beginnen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Datenkabels in die USB-Buchse des Netzteils (5V-1A).
2. Schließen Sie das Netzteil (5V-1A) an eine Steckdose an.
3. Zum Schluss stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Datenkabels in die Micro-USB-Buchse des Produkts.

*Eine freundliche Erinnerung: Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte weiter. Während des Ladevorgangs kann das Produkt nicht aktiviert werden.*

*Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie bitte das Netzteil. Wenn das Produkt während des Betriebs aufgeladen wird, stellt es den Betrieb automatisch ein, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.*

# Produktstruktur

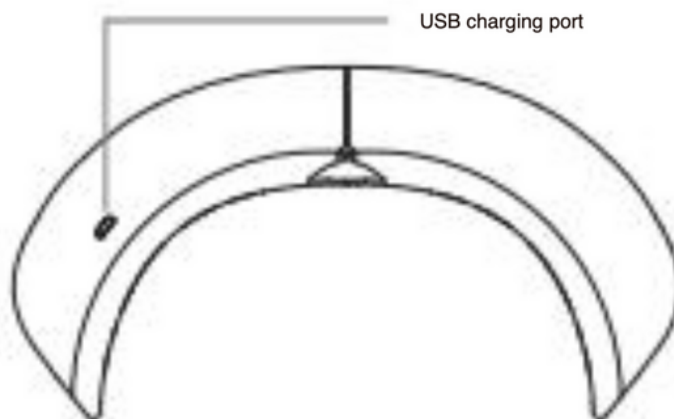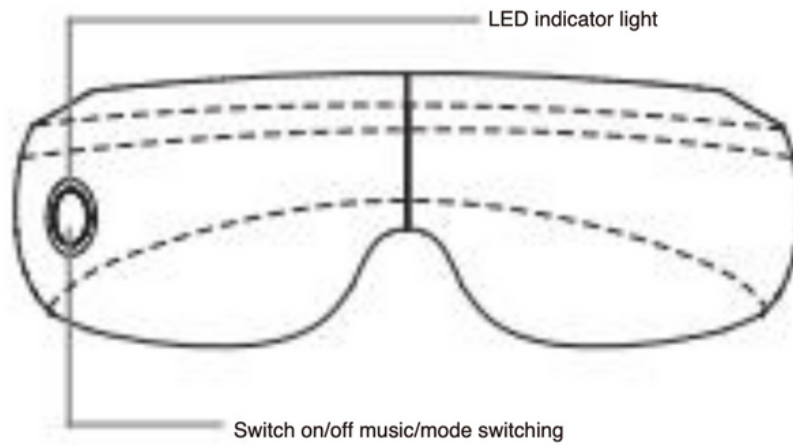

## Produktstruktur

Das Produkt beinhaltet:

LED-Anzeigeleuchte, Ein-/Ausschalter für Musik und Modusumschaltung, USB-Ladeanschluss

# Anweisungen

## **Einschalten / Ausschalten**

Um das Produkt zu aktivieren, halten Sie die „Power“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und die Maschine nimmt den Betrieb auf. Der Standardmodus ist automatisch und läuft während der Musikwiedergabe 15 Minuten lang.

Halten Sie während des Betriebs des Produkts die „Power“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Alternativ schaltet sich die Maschine nach 15 Minuten Nutzung automatisch ab.

## **Modi wechseln**

Zur Modusauswahl drücken Sie kurz die „Mode“-Taste. Durch einmaliges Drücken wechselt man in den zweiten Modus, durch zweimaliges Drücken in den dritten Modus und so weiter.

Musiksteuerung

Um die Musik zu verwalten, drücken Sie zweimal hintereinander in weniger als einer Sekunde die Taste „Musik“. Durch diese Aktion wird die Musik entweder ausgeschaltet oder eingeschaltet.

Moduseinführung

Automatischer Modus: Kombiniert Luftdruckmassage, Heißkompressenmassage, Vibrationsmassage und Musik.

Augenschutzmodus: Integriert Luftdruckmassage, Massage mit heißen Kompressen und Musik.

Vitalitätsmodus: Mit Luftdruckmassage, Vibrationsmassage und Musik.

Komfortmodus: Konzentriert sich auf die Massage mit heißen Kompressen und Musik.

Schlafmodus: Beinhaltet Luftdruckmassage und Musik.

# Anweisungen

## **Bluetooth-Konnektivität**

Sobald das Augenschutzgerät eingeschaltet ist, ist Bluetooth standardmäßig aktiviert. Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, aktivieren Sie bitte Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach Geräten. Der Standard-Bluetooth-Name ist „Eye Protector“. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik von Ihrem Telefon abspielen. Nach dem Trennen der Bluetooth-Verbindung spielt das Gerät die integrierte Meditationsmusik ab.

## Transport- und Lagerumgebung

Lagern Sie das Produkt in einem gut belüfteten, trockenen Raum mit normaler Temperatur und ohne korrosive Gase.

## Transport

Dieses Produkt ist mit grundlegenden stoßfesten Eigenschaften ausgestattet und eignet sich daher für den Transport per Flugzeug, Bahn, Autobahn oder Schiff. Stellen Sie sicher, dass es vor Regen, Witterungseinflüssen, Umdrehungen, Kollisionen und anderen widrigen Bedingungen geschützt ist.

## Reinigung und Lagerung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, weiches Tuch und denken Sie daran, das Gerät auszuschalten. Vermeiden Sie die Verwendung ätzender Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner, da diese zu Problemen wie Ausbleichen, Oberflächenalterung und Strukturschäden führen können.

Platzieren Sie das Produkt bei längerer Lagerung in einem gut belüfteten, trockenen Raum und ziehen Sie die Verwendung einer Schutzhülle in Betracht. Wenn das Produkt länger als drei Monate gelagert wird, empfiehlt es sich, es auszupacken und zu überprüfen und es mindestens eine halbe Stunde lang aufzuladen.

# Sicherheitsvorkehrungen

1. Augenerkrankungen: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Symptome einer Augenerkrankung aufweisen oder sich einer Augenoperation unterzogen haben. Personen, die an schwerwiegenden Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt oder Netzhautablösung leiden, sollten die Anwendung vermeiden.
2. Reinigungshinweise: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt direkt mit Wasser zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen stattdessen ein mit Alkohol oder Wasser getränktes Baumwolltuch.
3. Hitzeempfindlichkeit: Dieses Produkt verfügt über eine Heizfläche. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es bei Personen anwenden, die möglicherweise nicht hitzeempfindlich sind, wie z. B. Minderjährige, Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen. In solchen Fällen ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
4. Empfindliche Haut: Für Personen mit empfindlicher Haut, allergischer Dermatitis im Gesicht oder Personen, die Kunststoffe im Gesicht haben, wird empfohlen, dieses Produkt unter Anleitung eines Arztes zu verwenden.
5. Keine Demontage: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen. Es enthält Batterien und die Platzierung in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen kann zu gefährlichen Situationen, einschließlich Explosionsgefahr, führen. Befolgen Sie stets die ordnungsgemäßen Verwendungsrichtlinien.
6. Blockierte Sichtlinie: Die Verwendung dieses Produkts behindert Ihre Sichtlinie. Vermeiden Sie die Verwendung bei Aktivitäten wie Gehen, Autofahren und anderen Aufgaben, die eine freie Sicht erfordern.
7. Verschwommenes Sehen nach der Anwendung: Nach der Verwendung dieses Produkts ist es normal, dass Sie eine kurze Zeit lang verschwommen sehen, wenn Ihre Augen von einem entspannten in einen angespannten Zustand übergehen. Um dies zu lindern, schließen Sie Ihre Augen für 1-3 Minuten, dann wird Ihre Sicht allmählich klarer.

# Fehlerbehebung

## **Ausgabe:**

Das Gerät schaltet sich nach dem Einschalten automatisch ab oder lässt sich nicht einschalten.

Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht.

## **Mögliche Ursachen:**

Niedrige Batterieladung.

## **Lösung:**

Bitte laden Sie das Gerät auf.

## **Produktmerkmale**

Dieses Produkt verfügt über automatische Zeitmessung, Ferninfrarotheizung, Sprachübertragung, Tragbarkeit, wiederaufladbaren Akku, Bluetooth-Musikkonnektivität, Mehrfrequenzvibration und 180-Grad-Faltbarkeit.



# Wichtige Vorbereitungen und Aufladen vor dem Gebrauch

## **Vorbereitung vor dem Gebrauch:**

Richten Sie den Augenschutz an Ihren Augen aus, tragen Sie das Gerät, stellen Sie das Gummiband auf eine angenehme Größe ein und positionieren Sie das Gerät nach oben, unten, links und rechts, um den bequemsten Sitz zu erzielen.

Entfernen Sie vor der Anwendung Brillen, Kontaktlinsen, Haarnadeln, Haarschmuck und Ähnliches, um Beschwerden vorzubeugen. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts mit nassen Händen und achten Sie darauf, dass Sie es nicht fallen lassen oder darauf treten.

## Risikoüberlegungen:

Dieses Produkt dient als persönliches Gesundheitsmassagegerät und ist kein Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte.