

osmo

MICROLITE USER MANUAL





ELEKTRISCHES NANOKRISTALL-SCHÖNHEITSINSTRUMENT

MICROLITE LÄDT UND SCHLIESST ALLES IN EINEM GERÄT AN



1. Chip-Installation
2. Drehknopf zum Einstellen der Nadelhöhe
3. Ganganzeige
4. Drücken Sie 1,5 Sekunden lang auf die Stromversorgung, um den Mikrokristallschalter einzuschalten
5. Netzkabel, Android-Schnittstelle, zum Einstecken in das Gerät



Das Instrument sollte wasserdicht sein. Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Instrument eindringen. Nach der Operation stehen Wattestäbchen zur Verfügung. Reinigen Sie die Innenseite des Instrumentenhuts, um zu verhindern, dass die Essenzflüssigkeit in das Instrument fließt und einen Stau verursacht.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES NANOELEKTRISCHEN SCHÖNHETSINSTRUMENTS

ALLGEMEINE AUSGABE DER ANWENDUNGSANLEITUNG

Schritt 1 Waschen Sie Ihr
Gesicht normal



Schritt 2 Essenz/andere
Hautpflegeprodukte
auftragen, alkoholfreies
Hautpflegeprodukt




Schritt 3 Machen Sie mit der
Mikronadel Kreise um Ihr
Gesicht, indem Sie streichen
oder darauf tippen



Schritt 4 Tragen Sie 15-20
Minuten lang eine Maske
mit einer alkoholfreien, nicht
waschbaren Maske auf



Schritt 5 Tragen Sie eine
Creme auf, um die nährende
Feuchtigkeit zu speichern.
Alkoholfreie, nicht waschende
Maske

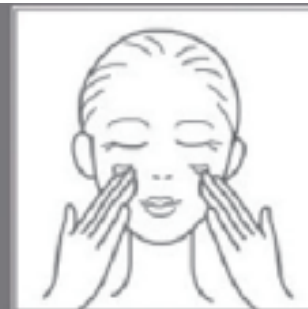

Häufige Fragen vor der Verwendung

Hände und Gesicht sollten gründlich gereinigt werden. Die Hände sollten mit Handlotion oder Seife gereinigt werden. und Gesicht sollten mit Gesichtereiniger oder Reinigungsmittel gereinigt werden.

Die Chips sind steril und müssen nicht sterilisiert werden.

Normal ist 2 Mal pro Woche, Nagelhautdünnung kann 1 Mal pro Woche erfolgen.

Darin wurde der Import von unabhängigen Einwegverpackungsprodukten mit relativ einzelnen Komponenten empfohlen, wie z. B. gefriergetrocknetes Pulver, Rohflüssigkeit (Hyaluronsäure, VC), Wasser und leichte, feuchtigkeitsspendende Maskenpastenprodukte.

Vor der Einführung funktioneller Produkte sollte das Produkt in einem kleinen Bereich hinter dem Ohr eingeführt werden, damit die Haut keine allergischen Symptome wie Rötung, Schwellung und Juckreiz aufweist. Tragen Sie es dann auf Ihr gesamtes Gesicht auf.

Lagerung

1. Sauber und trocken halten, in einer gut belüfteten Umgebung lagern, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Gewicht und Stöße vermeiden.
2. Bitte nicht an einem Ort aufbewahren, den Kinder erreichen können, fern von Kindern.
3. Bitte entfernen Sie den nanokristallinen Chip, wenn Sie den Mikrokristall aufbewahren.

Häufiges Problem bei der Verwendung

1. Wie funktioniert die Importmethode?

Bei der Anwendung sollten wir die Dicke und Haltbarkeit der Nagelhaut der Haut sowie den Punkt mit schlechter Ausdauer und starker Nagelhaut berücksichtigen. Dicke Slips werden im Allgemeinen in Bereichen wie Augen, Stirn, Mundwinkel, Wangenknochen oder Hals verwendet Da weniger Unterhautfett vorhanden ist, machen Sie Vorschläge.

2. Wie werden Timing-Einstellung und -Stärke gesteuert?

Es wird empfohlen, dass die Zeit der ersten Anwendung weniger als 0,5 beträgt. Später kann sie entsprechend der eigenen Situation angepasst werden. Berühren Sie zunächst sanft die Haut. Vorbehaltlich des Hautgefühls können keine Beschwerden auftreten und die Festigkeit leicht erhöht werden.

3. Wie nehme ich verschiedene Produkte ein?

Essenz: Nachdem Sie die Essenz auf das Gesicht aufgetragen haben, tragen Sie sie mit Nanokristallen vertikal auf die Haut auf. Einführung ins Gesicht, kann auch seitlich verschmiert werden.

4. C: Kann ich mehrere Produkte gleichzeitig verwenden?

Es wird empfohlen, nicht mehr als zwei Produkte gleichzeitig aufzutragen, und Haut mit schlechter Verträglichkeit kann jeweils nur ein Produkt importieren.

Häufige Probleme nach dem Gebrauch

1. Muss ich nach dem Import weitere Hautpflegeprodukte anwenden?

Es wird empfohlen, nach dem Import eine feuchtigkeitsspendende oder reparierende Maske zu verwenden. Bei trockener Haut kann es mit einer Feuchtigkeitscreme oder Creme kombiniert werden.

2. Darf man das Wasser berühren? Kann ich am nächsten Tag mein Gesicht waschen und schminken?

Es wird empfohlen, die Einfuhr nachts durchzuführen und am Tag nach der Einfuhr das Wasser nicht zu berühren. Wenn am nächsten Tag keine Beschwerden wie Rötung, Schwellung, trockener Juckreiz usw. auftreten, ist es normal, die Haut zu pflegen und zu schminken. Bei unangenehmen Symptomen verwenden Sie bitte basische Feuchtigkeitsprodukte.

3. Können Sie die Sonne, scharfes Essen, Meeresfrüchte und Wein genießen?

Es wird empfohlen, sich drei Tage lang nicht der Sonne auszusetzen und weniger scharfe Meeresfrüchte, Wein und andere anregende Gegenstände zu essen.

4. Kann der Chip wiederverwendet werden?

Der Chip ist ein Einwegchip und oxidiert beim Öffnen. Nach der Verwendung haftet der Chip am Keratin und an den Haaren oder an der Haut. Bakterien vermehren sich und eine Wiederverwendung wird nicht empfohlen.

Nutzungsschritte

1. reinigen Sie zuerst die Haut; Tägliche Make-up-Entfernung, Reinigung, Hauttoner kann zur sekundären Reinigung verwendet werden, entfernen Sie den Nano-Chip, der oben auf dem Mikrometer montiert ist.

2. Tragen Sie die richtige Menge der Originalflüssigkeit oder -essenz auf Ihr Gesicht auf.

3. Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um den Mikrokristall zu starten, und berühren Sie vertikal die Hautoberfläche. Es wird empfohlen, an jedem Kontaktpunkt 3,5 Sekunden lang zu warten.

4. Schalten Sie nach dem Vorgang bitte den Strom aus und entfernen Sie den nanokristallinen Chip. Tragen Sie gängige Hautpflegeprodukte auf. Creme usw. (Eine Einwaschmaske vor dem Auftragen von Hautpflegeprodukten funktioniert am besten.)

5. Nanokristalline Chips können nicht wiederverwendet werden, um Sekundärverschmutzung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie sie nach Gebrauch.

Funktionsweise des Mikrokristallinstruments

1. Klopfen und heben Sie das Gesicht an:

Nachdem der nanokristalline Wafer installiert ist, wird er vertikal auf die Hautoberfläche gelegt. Leichte Vertiefung, Geschwindigkeit, Dichte: sanftes Auf- und Abheben, Stärke anpassen.

2. Gleitmethode:

Nachdem der nanokristalline Wafer auf der Hautoberfläche angebracht wurde, kann visuell eine leichte Vertiefung in einer geraden Linie beobachtet werden. Während des Gleitens sollten die Nanokristalle die Hautoberfläche nicht verlassen und es wird empfohlen, höchstens 2 Mal 3,5 Sekunden lang auf derselben Stelle zu bleiben.

3. Kreismethode:

Nachdem der Nanochip auf der Hautoberfläche installiert wurde, kann das konkave Gefühl visuell erkannt werden und der Nanochip kann in kleinen Kreisen mit konstanter Geschwindigkeit absorbiert werden. Die Reisswaffel sollte die Hautoberfläche nicht verlassen. Es wird empfohlen, 3-5 Sekunden lang und nicht öfter als 2 Mal an derselben Stelle zu bleiben.

Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise zum nanoelektrischen Mikrokristallinstrument:

1. Bitte entfernen oder modifizieren Sie das Ladegerät und den Mikrokristall nicht. Es ist strengstens verboten, das Ladegerät zu verwenden, wenn das Netzteil bereits beschädigt ist. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen. Brand- und Ladeschäden.

2. Berühren Sie das USB-Ladekabel nicht mit nassen Händen. Wenn das Ladekabel mit anderen Flüssigkeiten in Feuer oder Wasser in Berührung kommt, unterbrechen Sie sofort den Strom.

3. Kein Kurzschluss-Ladegerät, keine mechanischen Vibrationen oder Schüttelinstrumente, kein direktes Sonnenlicht, kein Badezimmer und andere hohe Temperaturen. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Es ist strengstens verboten, zu regnen oder zu feucht zu werden.

4. Bitte verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radios und anderen Elektrogeräten. 5. Stecken Sie den Kopf ein, um sich auf den Ladevorgang zu konzentrieren. Wenn Sie am Netzkabel ziehen, wird die Ladeleitung beschädigt. Der Ladevorgang muss über Mikrokristalle und die Ladeleitung erfolgen. Die Verwendung nicht zertifizierter Ladekabel kann in einem belüfteten Bereich mit einer Temperatur von -10 °C bis +55 °C gefährlich sein Verletzung der Herstellergarantie. 6. Bitte bewahren Sie das Instrument außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Hautpflege

1. Hautpflegeprodukte müssen sicher, wirksam, ungiftig und für sich selbst geeignet sein.

Nanokristalliner Hinweis:

1. Wenn die Einwegverpackung unvollständig oder beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht, um Hautinfektionen zu vermeiden

2. Reinigen Sie vor dem Betrieb die Bedienteile und Hände.

3. Beim ersten Mal wird empfohlen, einen Hauttest an der Innenseite des Handgelenks in Kombination mit Hautpflegeprodukten durchzuführen, wenn Juckreiz usw. auftritt.

Nicht verwenden, wenn es empfindlich ist.

4. Die Stärke des Chips sollte mäßig sein, und es ist nicht notwendig, den Chip stark zu drücken oder das Handgelenk anzuheben, damit der Chip die Haut nicht gleichmäßig berühren kann.

5. Etwa 10 bis 20 Minuten nach der Verwendung des nanokristallinen Chips treten bei manchen Menschen Hautrötungen auf, was ein normales Phänomen ist. Wenn ja, verschwindet der Alarm automatisch nach 24 Stunden.

6. Mit Ausnahme des Chips dürfen andere Anschlüsse des Instruments nicht mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, um das Gerät nicht zu beschädigen.

7. Derselbe Chip kann immer nur von einer Person verwendet werden. Es ist strengstens verboten, denselben Chip mit anderen zu teilen oder ihn nach wiederholter Verwendung zu desinfizieren, da es sonst zu Hautallergien, roten Flecken, Entzündungen und anderen nachteiligen Folgen kommen kann.

8. Wenn Sie Nanokristalle lagern, entsorgen Sie die gebrauchten Wafer und lagern Sie die ungeöffneten Wafer und Mikrokristalle in einer gut belüfteten Umgebung, fern von Feuchtigkeit, Druck und Stößen, und halten Sie sie von Kindern fern.

9. Während des Gebrauchs sollte sich der nanokristalline Wafer in Bewegung halten und 3-5 Sekunden lang in der gleichen Position bleiben, und die Häufigkeit sollte das 2-fache nicht überschreiten

Vorsichtsmaßnahmen bei Mikronadeln

1. Verwendung von Mikronadeln: Gesicht reinigen --- Tragen Sie das einzubringende Produkt auf die betroffene Stelle auf --- Betreiben Sie die Mikronadeln 10-15 Minuten lang. Wenn Sie den Eingriff zum ersten Mal durchführen, wird empfohlen, vorsichtig vorzugehen und die Zeit auf etwa 10 Minuten zu beschränken (kleben Sie den Vorgang einfach auf die zu bearbeitende Stelle, kein starker Druck erforderlich). Während der Operation sollte derselbe Teil nicht länger als 3 Sekunden verwendet werden und der zu bearbeitende Teil sollte dreimal hin und her gelaufen werden. Essen Sie innerhalb von 3 Tagen nach der Mikronadelung keine Meeresfrüchte.
2. Es wird empfohlen, vor der Anwendung des Produkts eine kleine Menge auf die Haut hinter den Ohren aufzutragen und es nur zu verwenden, wenn keine Rötung oder Juckreiz auftritt.
3. Nach der Operation wird Ihr Gesicht leicht gerötet sein. Leichtes Stechen und leichter Juckreiz sind normale Phänomene. Zur Schmerzlinderung können Sie eine beruhigende Salbe oder eine Eismaske auftragen.
4. Das Instrument sollte wasserdicht sein und es dürfen keine Flüssigkeiten in das Instrument eindringen. Drehen Sie das Instrument während des Betriebs nicht auf den Kopf. Essenzflüssigkeit kann leicht von der Nadel in den Tubenkörper zurückfließen, wodurch die Maschine nicht mehr betriebsfähig ist.
5. Berühren Sie nach der Verwendung der Mikronadel 6 Stunden lang kein Leitungswasser, da Bakterien leicht Infektionen verursachen können. Sie können Kochsalzlösung, kühles, abgekochtes Wasser oder Toner verwenden, um Ihr Gesicht abzuwischen. Zweitens wird starkes Make-up nicht empfohlen.
6. Befeuchten Sie nach der Verwendung von Mikronadeln mehr, befeuchten Sie mehr, befeuchten Sie mehr und schützen Sie sich vor der Sonne.