

osmo

OrthoVivid




Benutzerhandbuch



Um das Benutzerhandbuch
in einer anderen Sprache zu
lesen,
gehen Sie zu
osmousermanual.com



Model	HF-6	Input	5V 1A
Material	ABS, PC	Wasserdruckbereich	40-110 psi
Aufladezeit	3-5 Stunden	Wasserdicht	IPX7
Kapazität	300 ML	Wasserdruck	Pulsierendes Wasser

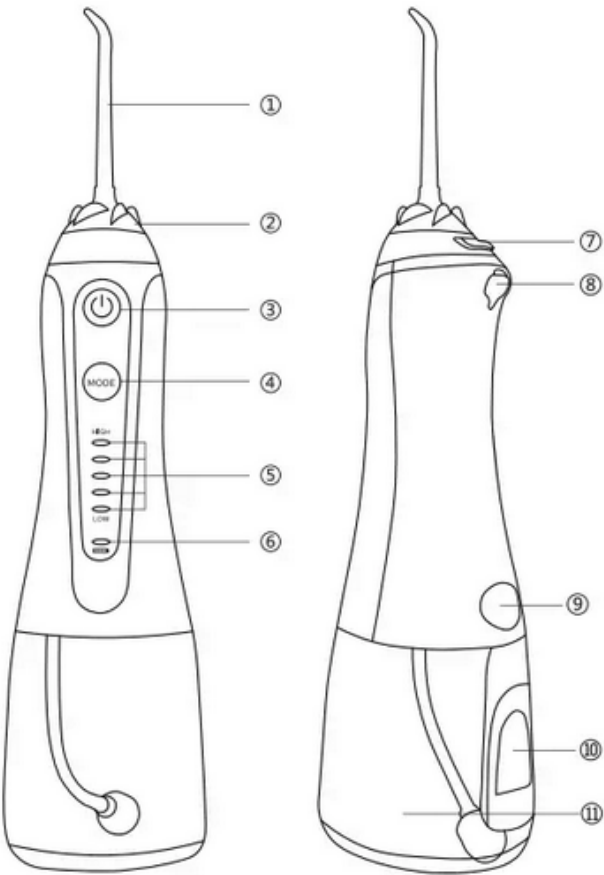


- 1.Düsenspitze
- 2.Drehrad für die Düse
- 3.Einschalttaste
- 4.Taste für Moduswahl
- 5.Modus-Anzeigeleuchten
- 6.Kontrollleuchte für den Ladevorgang
- 7.Taste zum Lösen der Düsenspitze
- 8.Anschluss zum Aufladen
- 9.Tankentriegelungstaste
- 10.Wassertankdeckel
- 11.Wassertank



USB-Kabel




Tongue
scraper tip

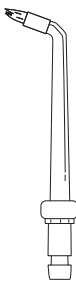

Orthodontic
tip



Periodontal
tip

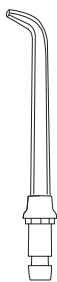

Standard
tip

×2

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch:

- Fassen Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen an.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder fallen.
- Überprüfen Sie das Kabel des Ladegeräts vor der ersten Verwendung und während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf Schäden. Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung angegeben oder wie von Ihrem Zahnarzt empfohlen.
- Verwenden Sie nur die von H2ofloss empfohlenen Aufsätze und Zubehörteile.
- Vermeiden Sie, dass Fremdkörper mit den Öffnungen des Geräts in Berührung kommen.
- Halten Sie das Ladegerät und das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie kein Jod, keine Kochsalzlösung oder wasserunlösliche konzentrierte ätherische Öle in diesem Gerät. Die Verwendung dieser Stoffe kann die Leistung verringern und die Lebensdauer des Produkts verkürzen. Diese Produkte können zum Erlöschen der Garantie führen.
- Füllen Sie das Reservoir nur mit Wasser oder einer anderen von einem Zahnarzt empfohlenen Lösung.
- Nehmen Sie vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck ab. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine offene Wunde auf der Zunge oder im Mund haben.

Wartung

Achten Sie darauf, das Wasser im Tank auszuschütten und ihn nach dem Gebrauch einige Sekunden lang zu reinigen. Andernfalls könnten sich im Restwasser Bakterien ansammeln. Wischen Sie das Äußere bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem Reinigungsmittel ab. Der Behälter kann mit Seifenwasser gereinigt werden. Trocknen Sie den Behälter, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Garantie


Osmo repariert oder ersetzt Ihr Gerät kostenlos für 24 Monate ab dem Kaufdatum, wenn das Gerät einen Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweist. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung oder Gebrauch sowie Defekte zurückzuführen sind, die den Wert oder den Betrieb des Geräts im geringsten beeinträchtigen.

Warnung

Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein anderes als das auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebene Stromnetz an.

Leiten Sie kein Wasser in die Nase oder das Ohr.


Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

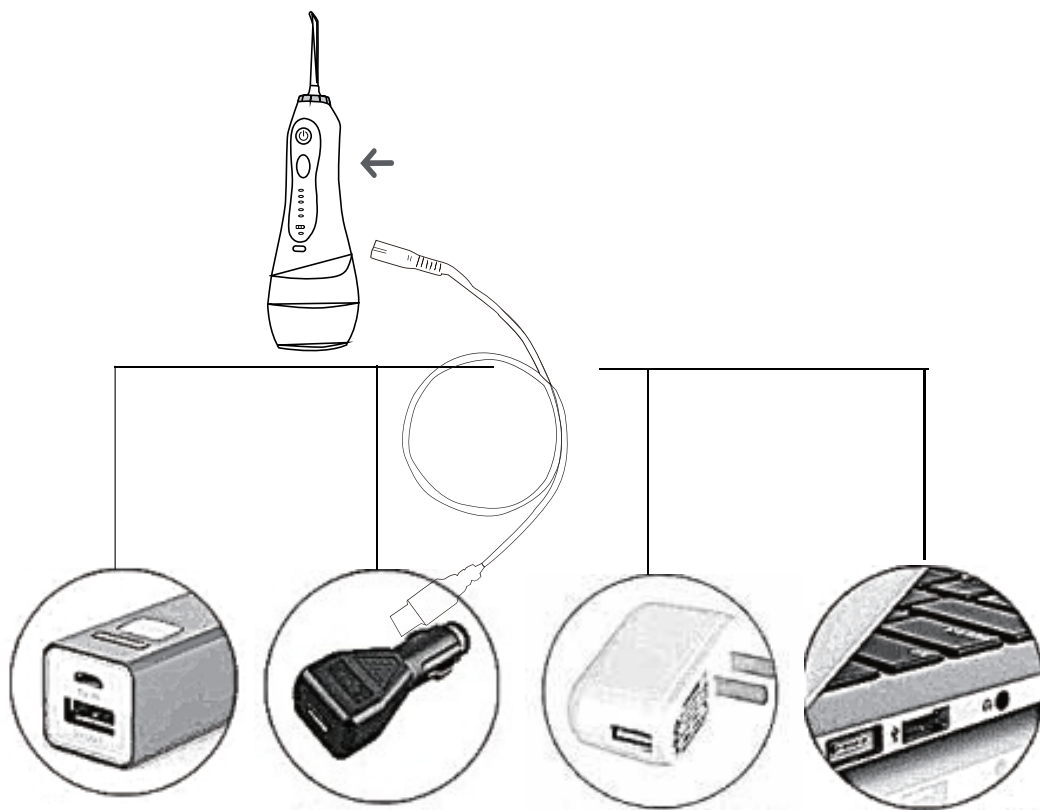

Dieses Produkt wird nicht mit einem AC/DC-Ladegerät geliefert. Das Gerät kann über 5V USB-Strom aufgeladen werden, z. B. über einen Laptop, ein USB-Wandladegerät usw. Die Ladeanzeige am Griff blinkt beim Aufladen. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 3-5 Stunden.

Befüllung des Tanks


Heben Sie den Klappdeckel des Behälters an und füllen Sie ihn mit lauwarmem Wasser.

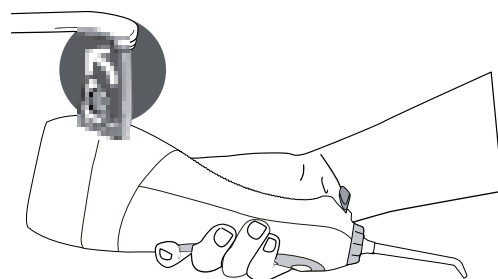

Einsetzen und Entfernen von Aufsätzen

Stecken Sie die Düse in die Mitte des Knopfes am oberen Ende des Griffs. Drücken Sie sie fest, bis die Spitze einrastet.


Um die Düse zu entfernen, drücken Sie die Auswurf-taste für die Düse und ziehen Sie sie heraus.

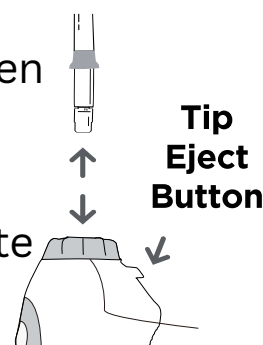

VORSICHT: Drücken Sie die Taste zum Abwerfen der Düse nicht, während das Gerät läuft.

Einstellung der Wasserstärke


Sie können die Druckeinstellung an Ihrem Water Flosser durch Drücken der Modustaste am Griff anpassen. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie sie je nach Bedarf.

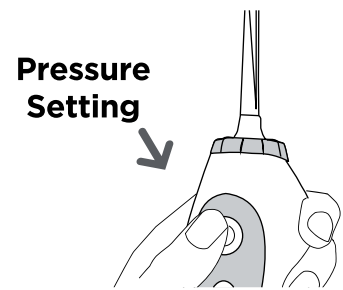

Verwendung des Zubehörs


Standard Tip

Schieben Sie den Griff und den Schalter nach oben, um den Wasserstrahl zu starten. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser in das Waschbecken fließen kann. Richten Sie den Wasserstrahl auf den Zahnfleischrand, so dass der Kontakt zwischen Zahn und Zahnfleisch hergestellt wird. Denken Sie daran, die Intensität so einzustellen, dass Ihr Zahnfleisch nicht verletzt wird, falls Sie empfindliches Zahnfleisch haben.

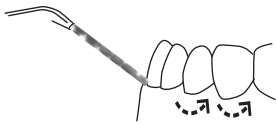


Periodontal Tip

Setzen Sie den Parodontalkopf zwischen den Zähnen und dem Zahnfleischrand an. Legen Sie die weiche Spitze in einem 45-Grad-Winkel an einen Zahn an und führen Sie die Spitze vorsichtig unter den Zahnfleischrand. Stellen Sie die Wasserstrahl auf den niedrigsten Druck ein und reinigen Sie, indem Sie vorsichtig dem Zahnfleischrand folgen und die Parodontalspitze zwischen die Zähne einführen. Fahren Sie weiter entlang des Zahnfleischsaums, um das Zahnfleisch zu massieren.

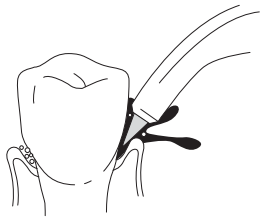

Orthodontic Tip (für Zahnspangen und Implantate)

Verwenden Sie den kieferorthopädischen Kopf zum gleichzeitigen Bürsten und Spülen von schwer zugänglichen Bereichen um Zahnspangen, Kronen, Brücken und Implantate. Setzen Sie die Spitze im rechten Winkel zum Zahn am Zahnfleischrand an. Gleiten Sie mit der Spitze sanft am Zahnfleischrand entlang und halten Sie kurz inne, um den Bereich zwischen den Zähnen und rund um die kieferorthopädische Klammer leicht zu bürsten.

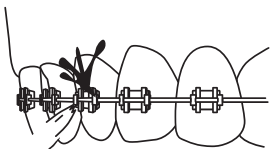

Tongue Cleaner Tip

Setzen Sie den Kopf des Zungenreinigers auf den hinteren Teil Ihrer Zunge und spülen Sie sie hin und her, um Ihre Zunge vollständig zu reinigen.




SONSTIGES




Es kann vorkommen, dass der Düsenkopf nach längerem Nichtgebrauch des Geräts nicht mehr sofort Wasser versprüht.

Wenn dies der Fall ist, fügen Sie bitte eine angemessene Menge Wasser an der Stelle hinzu, an der die Düse eingesetzt ist. Setzen Sie die Düse ein und drücken Sie die Einschaltttaste, um das Gerät einzuschalten.

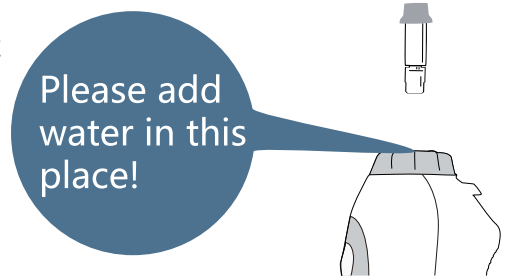

Der Wasserdank ist durch einfaches Ziehen abnehmbar. Beim ersten Mal kann es ein wenig Kraft erfordern.

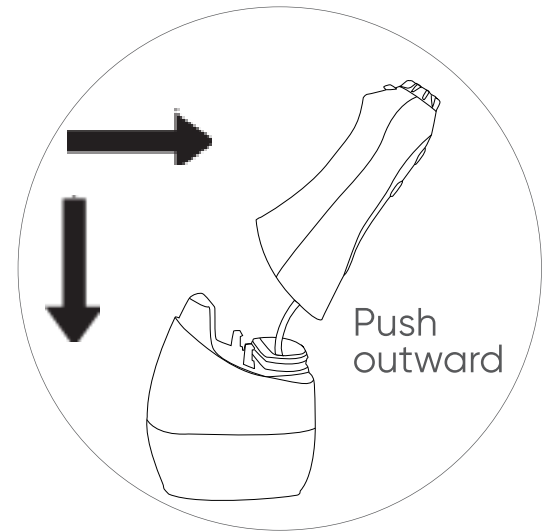

Problem	Cause	Corrective action
Reservoir leaks	Seal ring is abnormal	Remove the seal ring and reinstall
Low water pressure	Low battery	Recharge the device
	Nozzle head blocks	Replace with new nozzle heads
Lasts only few minutes with full charge	Dead battery	Contact retailers
	Charging cord	Try with new charging cable
	adapter broken	Try with new adapter
Motor makes sound but no water coming out	Nozzle head blocks	Replace with new tips
	Suction valve dislocation	Keep device on, fill water to the hole where nozzle head goes into
Motor doesn't make sound	Low Battery (Keep the device idle for more than 3 month))	Activate the battery by recharging it for 16 hours
Product stopped working suddenly	Overheating protection is activated (Continuous use 5 tanks of water with highest pressure)	Restart the device in 2 hour

osmo



Um das Benutzerhandbuch in einer anderen
Sprache zu lesen, gehen Sie zu
osmousermanual.com

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere
Unterstützung?

Schicken Sie uns eine E-Mail an
support@osmodeutschland.de und wir helfen
Ihnen gerne weiter!