

# osmo

---

## **TENS UNIT USER MANUAL**



Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt.

Sicherheitsvorkehrungen:

Nicht mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten verwenden:

Verwendung von Herzschrittmachern und implantierbaren medizinischen elektronischen Geräten:

Verwendung von künstlichen Herz-Lungen-Schrittmachern und lebensverlängernden medizinischen elektronischen Geräten;

Verwendung von EKG-Geräten und Tragen medizinischer elektronischer Geräte;

Die Platzierung des Massagepflasters sollte nicht in der Nähe des Herzens und der Brust des menschlichen Körpers erfolgen. Kein elektrischer Impuls kann das Herz beeinträchtigen und zu Beschwerden führen.

Hautabschürfungen und eitrige Entzündungen, mit Vorsicht anwenden; Wenn Sie eine Massage von einem der oben genannten Mittel erhalten, massieren Sie das Pflaster so, dass es die Wunde nicht berührt, damit es nicht brennt und die Wunde verschlimmert; Es wird empfohlen, die Verwendung unter Anleitung des Verkäufers durchzuführen.

Patienten, Kindern und Kindern ohne selbstständige Fähigkeit wird empfohlen. Patienten mit Herzerkrankungen, Diabetes und Leberzirrhose sollten nicht zugelassen werden.

Patienten mit implantierten Metallgeräten ist die Verwendung verboten; Bei gleichzeitiger Verwendung der oben genannten medizinischen elektronischen Geräte kann es aufgrund falscher Bedienung zu Gefahren kommen.

Mit Vorsicht verwenden, wenn:

Bösartiger Tumor;

Infektionskrankheiten:

Menstruierende und schwangere Frauen:

Ein Herzinfarkt sollte nicht in der Nähe des Herzens platziert werden.

Fieber über 38 Grad:

Abnormale Hautempfindlichkeit;

In den folgenden Körperteilen: Mund, Augen, Perineum, Hauttrauma. Dieses Produkt nicht verwenden;

Verwenden Sie es nicht zusammen mit anderen Massagegeräten oder ähnlichen Instrumenten oder der Anwendung von Medikamenten.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf nüchternen Magen:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Ihnen schwindelig ist. Dieses Produkt gehört zu den Massageinstrumenten, nicht zu den medizinischen Geräten für Massageinstrumente.

## Funktionsmerkmale

- 1) Wenden Sie digitale Technologie an, um die vom menschlichen Körper benötigten physikalischen Faktoren in Intoprec111 umzuwandeln, das dann von einem Computer entsprechend den Bedürfnissen des menschlichen Körpers massiert wird. Stellen Sie die Genauigkeit der Massage sicher und verbessern Sie die Wirksamkeit des Managements erheblich.
- 2) Mit einer großen Bildschirm-LED, die Stärke, Funktion, Modus und Massage abdeckt. Zeit. Chinesisches und englisches Anzeigesystem, Meridiandiagramm des menschlichen Körpers.
- 3) Massagepflaster wird verwendet, um einen größeren Bereich abzudecken.
- 4.) Verschiedene Massagefunktionen. Erhöhen und koordinieren Sie den Körperwiderstand und verlangsamen Sie effektiv Körperschmerzen, die durch verschiedene äußere Faktoren verursacht werden.
- 5) Wunderbare Wellenformkombination, damit Sie die Simulation von Akupunktur, Stampfen und Schlagen wirklich erleben können. Das echte Gefühl von Schlaganfall, Massage, Schröpfen, Massage und Schaben
- 6) LED-Meridiandiagramm für die Messung. Wählen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen und anhand des Meridiandiagramm-Leitfadens die wunden und unangenehmen Stellen für die Massage aus. leicht zu bedienen.

## Produktmerkmale

Dieses Produkt VERWENDET die High-Tech-Computer-Digitaltechnologie, eine imitierte handähnliche Massagebewegung, Integration fortschrittlicher ergonomischer Theorie, ähnlich dem Drücken der menschlichen Hand auf die Hautoberfläche. Reibpflaster, dünn, 2 Stück kleben an der Stelle, die verwaltet werden muss, beschleunigen die Blutzirkulation, schnell Beseitigen Sie schnell Müdigkeit, Nackenschmerzen und Steifheit und lindern Sie schnell den Druck oder die Arbeit. Bringen Sie die gute Laune zurück.

Dieses Produkt ist exquisit und kompakt. Licht., kann in einer warmen Familie verwendet werden. Ja, es kann auch in Autos und Büros ein- bis dreimal täglich angewendet werden, jeweils fünf bis fünfzehn Minuten lang bei allen Arten von Muskelkater und Rückenschmerzen. und Schulterpalne, Nackenschmerzen, Lag-Schmerz. usw., sanfte Handmassage, schnelle Muskelermüdung. Verjüngen. Bringen Sie ein unerwartetes Gefühl der Leichtigkeit und lassen Sie Ihre Arbeit wahr werden.

## Anweisungen:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, installieren Sie die positiven und negativen Elektroden der Batterie und schließen Sie die Batterieabdeckung.

Führen Sie die Knopfleiste in das Ausgabeloch oben am Produkt ein und verbinden Sie dann die Knopfleiste mit dem Patch. Ziehen Sie die Oberflächenfolie des Pflasters ab und kleben Sie das Massagepflaster dann auf die zu massierende Stelle. Beachten Sie, dass zwei Massagestäbe gleichzeitig auf einer Person angebracht werden müssen.

Beginnen Sie mit der Verwendung des Produkts.

Dieses Produkt verfügt über zwei Stromversorgungsmodi: Netzteil und Batterie. Sie müssen die Batterie herausnehmen.

Trennen Sie die Stromquelle, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Das USB-Kabel kann zur Verwendung auch direkt an den Computer angeschlossen werden.

## Funktionen:

Knopfleitungsbuchse: Schließen Sie das Massagepflaster an

Flüssigkristall-Anzeigebildschirm: Intuitive synchrone Anzeige des Maschinenzustands.

Ein/Aus-Taste: Ein-/Ausschaltfunktion.

Display-Taste in Chinesisch/Englisch: Drücken Sie diese Taste, um die LCD-Anzeige in Englisch auszuwählen

Funktionsauswahltaste (Modustaste): Dieses Gerät verfügt über 8

Massagefunktionen: Akupunktur, Schlag, Massage, Schröpfen, Schaben, Abnehmen, Immunregulierung, entsprechend: Einmal klicken, um einen Massagemodus zu ändern, 8 Modi können nacheinander ausgewählt und geöffnet werden Die Maschine wechselt automatisch in den Nadelmodus:


6. Timing-Taste: Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, können Sie das Timing um 5 Minuten und maximal um 15 Minuten erhöhen. Automatisches Timing um 15 Minuten nach dem Start:

7. Intensitätserhöhungstaste: Erhöhen Sie die Intensität der Massage. Mit jedem Tastendruck wird die Intensität erhöht, bis das Maximum von 15 erreicht ist

8. Intensität für die Abschwächungstaste: Verringern Sie die Massageintensität, indem Sie mit jeder Taste einmal einen starken Grad verringern, bis 0 erreicht ist.




Beachten Sie das schematische Diagramm der Massagepunkte

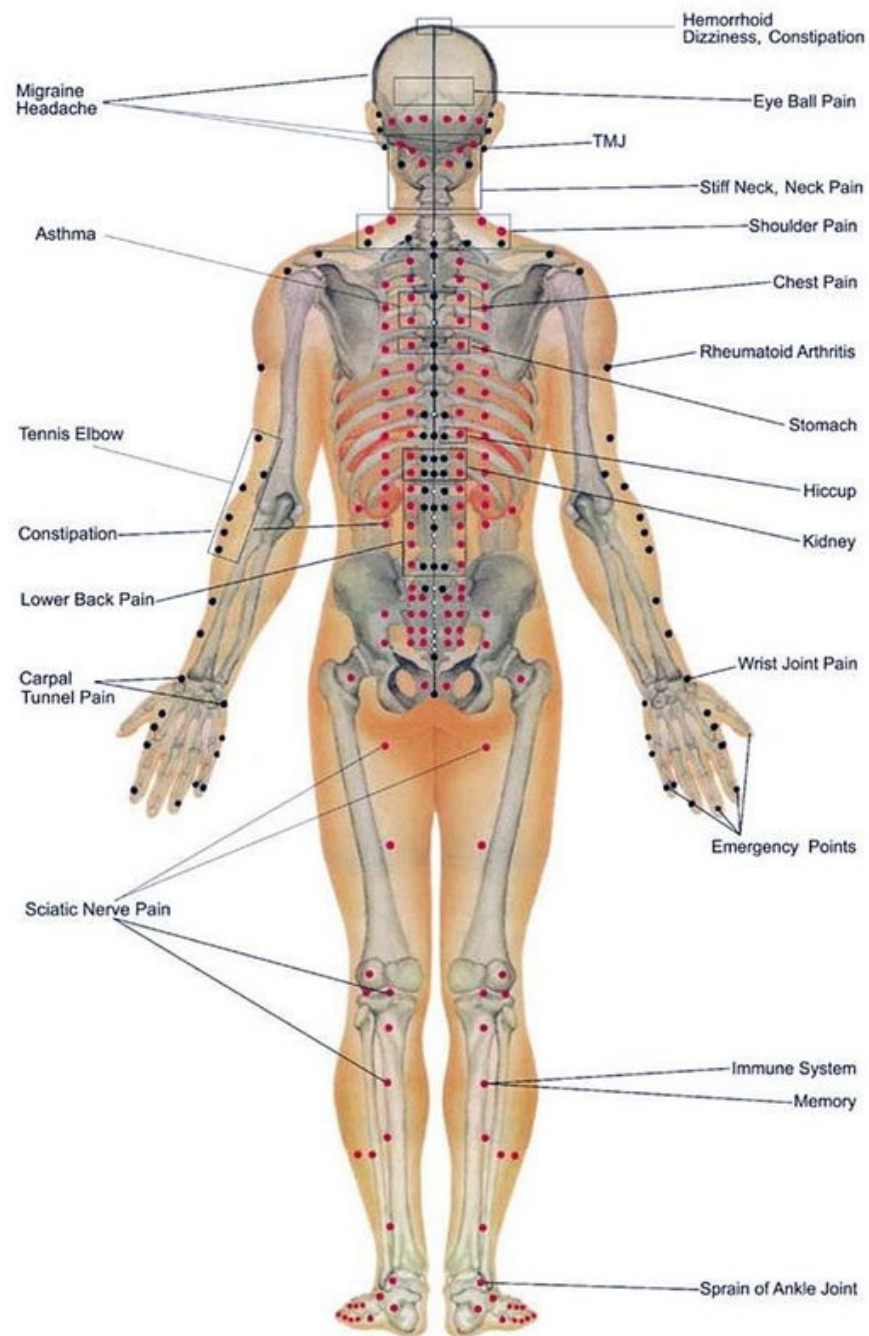



Beachten Sie das schematische Diagramm der Massagepunkte

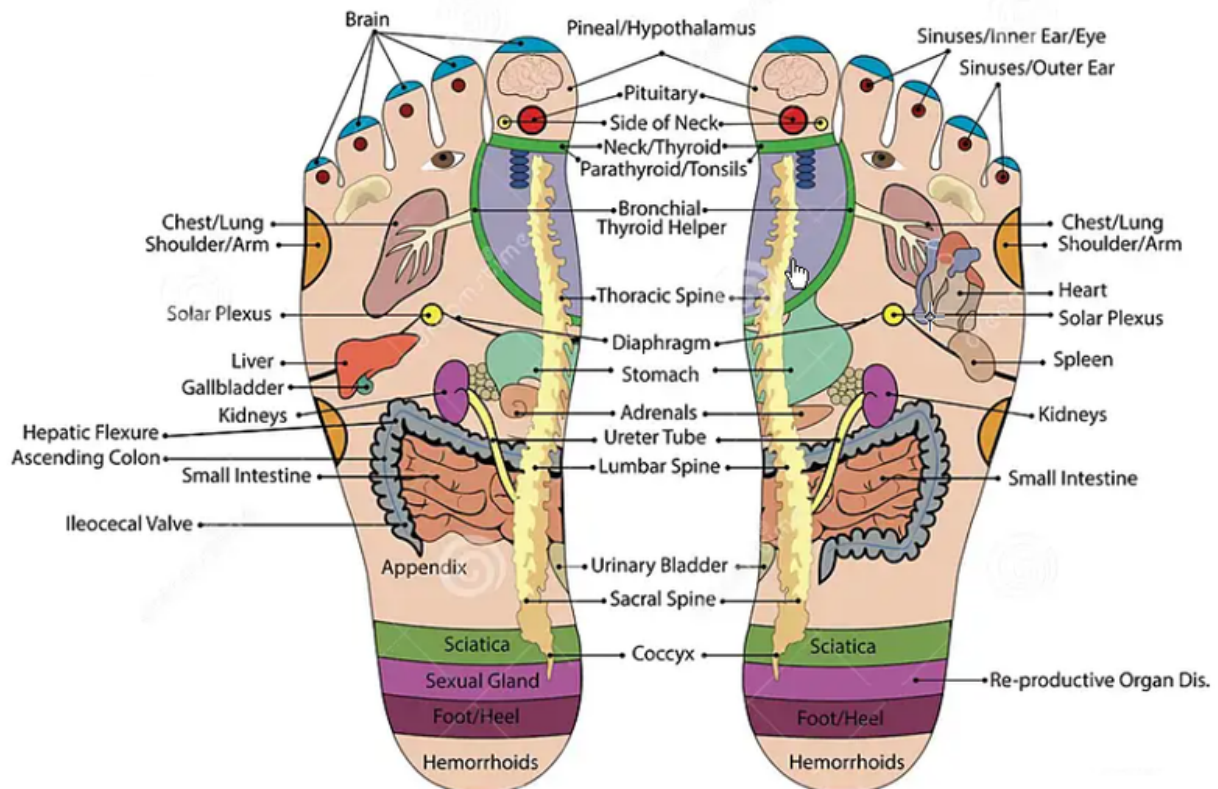

## Vorbereitung vor der Verwendung des Geräts

### Wägezelle

Öffnen Sie vorsichtig die Batterieabdeckung

Laden Sie 3 Auswahl der Batterie Nr. 7 und achten Sie auf die Positionen der positiven und negativen Elektroden.

Schließen Sie den Deckel der Box

### Bereiten Sie das Massagepflaster vor

Reinigen Sie den zu massierenden Bereich, um Ölflecken und auf der Hautoberfläche zu entfernen.

Ziehen Sie vorsichtig das Schutzpapier auf der Oberfläche des Massagepflasters ab.

Schützen Sie das Papier vor dem Weglassen, massieren Sie es ein und legen Sie das Klebeband nach Gebrauch auf das Schutzpapier

### Massageposition

Trocknen Sie den zu massierenden Bereich mit einem feuchten Handtuch ab, um Fett und Statine zu entfernen. Tragen Sie das Massagepflaster auf die zu massierende Stelle auf

Es sollten 2 Paar Massagepflaster gleichzeitig am Massagebereich angebracht werden, sonst ist eine symmetrische Platzierung des Massagepflasters nicht möglich.

### Kundendienst und Garantie:

Wenn 14 Tage nach Erhalt ein Leistungsausfall auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Abdeckung zu überprüfen.

2 Jahre Garantie auf Ersatz jeglicher Schäden oder fehlerhafter Artikel; Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Nichtbeachtung der Lagerungsmethode verursacht wurden, sind nicht enthalten



## Produktwartungs- und Lagerungsmethode

1. Reinigen Sie den Hauptmotor; Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab, machen Sie den Hauptmotor nicht nass, verwenden Sie kein nasses Wolltuch. Wischen Sie den Hauptmotor ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Benzin oder andere leicht entwickelbare Flüssigkeiten.
2. Reinigen und massieren Sie das Pflaster; Der Schmutz auf dem Pflaster kann mit einem feuchten Tuch abgewischt oder mit Wasser abgewaschen werden. Sofort waschen und trocknen, bevor es verwendet werden kann.
3. Lagerung: Stellen Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie es von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- 4.
5. Transport:
- 6.
7. Das Produkt ist mit einfachen Antivibrationseinrichtungen ausgestattet und eignet sich für den Luft-, Schienen-, Autobahn- und Schiffstransport. Regen- und Schneespritzer, Umkehrungen und Kollisionen sollten vermieden werden.
- 8.
9. Lagerung:
- 10.
11. Wenn die Lagerdauer 6 Monate überschreitet, sollte der Karton zur Inspektion ausgepackt und eine halbe Stunde lang unter Strom gesetzt werden; nicht in der Nähe von Boden, Wänden und Dach
12. Die Belüftung der Innenräume sollte gut sein, starke Sonneneinstrahlung und Erosion durch korrosive Gase vermeiden

## Produktspezifikation

Stromversorgung: 3 DC 4,5 V Trockenbatterien Frequenz: 1–330 Hz Leistung: 17 m A (Widerstandslast = 1K) Hostgröße: 1,5,3 cm x 7,0 cm x 2,8 cm Gewicht: 90 g

## Leitfaden zur Fehlerbehebung

Failure State	Why	To deal with
Load the Battery LCD does not display	<p>Whether there is any foreign body in the battery box</p> <p>Whether the battery is exhausted or installed upside down</p> <p>Whether the battery is in the bad contact with the battery</p>	<p>Check and Clear</p> <p>Replace or place the battery correctly</p> <p>Use the right tool to pick out the pole</p>
Load battery liquid crystal flash but does not flash	It is not malfunction	Remove the battery after 4 seconds
The liquid crystal is normal, no sensation	<p>The plug is not correctly inserted into the hole</p> <p>Whether the massage patch is in normal contact with the skin correctly</p>	<p>Correct Plug</p> <p>Button the thread and massage the patch</p>
The stimulation becomes weak or has a numbing sensation	<p>whether the massage patch is in the contact with the skin correctly</p> <p>Massage patch surface is dirty</p> <p>Whether the body surface has grease</p>	<p>Place the massage patch firmly on the skin</p> <p>Clean or replace the massage patches</p> <p>Clean the surface</p>
In massage, the output is stopped before 15 minutes are used	Whether the battery is exhausted	Replace the battery
The skin becomes red, itchy or irritated at the massage site	The skin is not sensitive to sticky pads	Check the skin for any history of allergy. For minor allergies, only change the massage position or shorten the massage time. For several allergies, stop using it