

The background features a soft, draped pink fabric texture. A large, faint white circle is centered behind the text.

**silkier.**

---

**BENUTZERHA  
NDBUCH**

# **silkier.**




To read the user manual in a different language,  
scan this QR code or go to [osmousermanual.com](http://osmousermanual.com)

## Machen Sie sich mit IPLuxe vertraut

Der Silkier IPLuxe Haarentferner ist ein elektrisches Gerät. Daher sollte bei der Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden. Da es sich hierbei nicht um ein kabelloses Gerät handelt, halten Sie sich während des Gebrauchs in der Nähe einer Steckdose auf.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch unbedingt vollständig durch und achten Sie besonders auf die Sicherheitsregeln. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen. Silkier übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Missbrauch oder Vernachlässigung der Sicherheitsvorschriften verursacht werden.

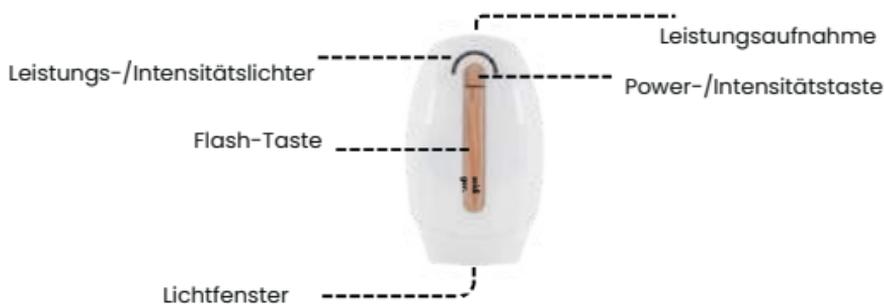

## Verwendungszweck

Dieses Gerät soll unerwünschten Haarwuchs entfernen und langfristig eine dauerhafte Haarreduzierung bewirken. Unter dauerhafter Haarreduktion versteht man eine über einen längeren Zeitraum stabile Reduzierung des Haarwachstums nach der Behandlung.

Mit dieser Methode können Sie unerwünschte Körperbehaarung entfernen. Ideale Körperbereiche für die Behandlung sind Unterarme, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Haarentfernung.

## Sicherheit

Die Intense Pulsed Light (IPL)-Technologie in diesem Gerät bietet aufgrund des geringeren Energieverbrauchs erstklassige Sicherheit. Dieses Gerät erreicht eine lange Lebensdauer.

Dauerhafte Ergebnisse bei der Haarentfernung mit einem Bruchteil der Energie, die bei anderen lichtbasierten Haarentfernungsgerten verbraucht wird.

Der geringe Energieverbrauch verringert das Risiko von Verletzungen oder Komplikationen und verbessert die allgemeine Sicherheit. Dieses Gerat verfugt uber zusatzliche Funktionen zum Schutz Ihrer Augen, da die Lichtimpulse nur dann aktiv sind, wenn die Behandlungsoberflache die Haut vollstandig beruhrt.

Schauen Sie bitte nicht direkt auf das Blitzglas des IPL-Gerats und versuchen Sie nicht, das Gerat einzuschalten, wahrend Sie es auf Ihre Augen richten. Dies dient dazu, sich selbst und andere zu schutzen.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht ofter als einmal pro Woche an derselben Stelle. Dies fuhrt nicht zu besseren oder schnelleren Ergebnissen und kann zu Schaden an Ihrer Haut fuhren.

## Verwenden Sie IPL nicht, wenn...

- Sie sind schwanger, stillen oder unter 18 Jahre alt.
- Sie moechten einen Bereich behandeln, der fuer IPL nicht geeignet ist.
- Sie hatten oder haben Hautkrebs.
- Sie hatten eine Selbstbraeunungsbehandlung oder waren kurzlich mehrere Stunden in der Sonne.
- Sie haben eine chronische Krankheit oder eine chronische Hauterkrankung.
- Sie haben im Behandlungsbereich geschadigte Haut.
- Sie haben Krampfadern im Behandlungsbereich.
- Sie reagieren aufgrund von Medikamenten oder aus anderen Gruenden empfindlich auf Sonnenlicht.
- Sie haben gerade ein Peeling im ausgewahlten Behandlungsbereich durchgefuehrt.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät ist nur für einen einzigen Benutzer bestimmt.
- Es ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät verwenden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen potenziellen Gefahren verstehen.

## Elektrizität und Brandschutz

- Überprüfen Sie die Hilfe und die Tücher immer regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Schäden. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden oder Risse am Gerät auftreten.
- Bei Verwendung eines beschädigten Geräts kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Im Fehlerfall muss das Gerät von einem autorisierten Servicecenter überprüft und repariert werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturarbeiten können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Netz.

## Vorsicht

- Nicht in oder in der Nähe von Wasser und nassen Oberflächen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Behältern mit Wasser verwenden. Wenn das Gerät bekommt nass, sollte es nicht verwendet werden. Wenn Sie das Gerät in nassem Zustand verwenden, kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (z. B. rissige Abdeckung, Leitungsschäden usw.). Innenteile enthalten gefährliche elektrische Ladungen.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Glasfilter Risse aufweist oder fehlt. Überprüfen Sie den Glasfilter regelmäßig auf Beschädigungen.
- Berühren Sie den Glasfilter nicht während oder unmittelbar nach dem Gebrauch, da er heiß wird.
- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel (Alkohol, Acetone) für das Gerät, da diese eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen oder den Glasfilter zerkratzen.
- Bitte versuchen Sie nicht, dieses Gerät für andere Zwecke als die Entfernung unerwünschter Haare zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf anderen Oberflächen als der Haut.
- Drücken Sie die Behandlungstaste nicht, wenn das Behandlungsfenster nicht vollständig Kontakt mit der Haut hat.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Das Gerät kann überhitzen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.

## Vorbereitung vor dem Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Haut frei von Haaren, Hautcreme und Ähnlichem ist. Außerdem muss die Haut vor Beginn der Behandlung trocken sein. Zur Entfernung der Gesichtsbehaarung vor der Anwendung empfehlen wir ein Nickerchen machen und die Verwendung eines Rasierers. **ACHTUNG!** Beachten Sie, dass das Gerät während des Gebrauchs heiß wird.

## So schalten Sie das Gerät ein

Mit dem Netzkabel können Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen. Drücken Sie auf der Seite ohne goldene Taste kurz und sanft die grüne Taste, um das Gerät zu starten. Ein Ventilator startet und das Gerät ist betriebsbereit.

Von Anfang an leuchten zwei Lichter auf der Vorderseite, eines blau und eines rosa. Das rosa Licht erlischt, wenn das Gerät Kontakt mit der Haut hat und zum Zapfen bereit ist. Umgekehrt leuchtet sie, wenn das Gerät keinen Kontakt mit der Haut hat.

## Wählen Sie die richtige Intensität

Standardmäßig ist das Gerät auf die niedrigste Intensität eingestellt, nämlich Stufe 1. Bei Ihrer ersten Sitzung nach einem Hauttest sollten Sie versuchen, Ihre Kraft auf die maximale Stärke von 5 zu steigern.

Der Hauttest wird im Folgenden erklärt. Wenn maximale Kraft unangenehm ist, können Sie die Kraft reduzieren und in der nächsten Sitzung lieber wieder steigern.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, die maximale Stärke 12 Wochen lang anzuwenden, da dadurch die beste Wirkung erzielt wird.

## Wählen Sie die Intensitätsstufe entsprechend Ihrem Hauttyp:



**Hell/Blass**  
**3-5 (maximal 4 für das Gesicht)**



**Mittel/Oliv**  
**2-4 (maximal 3 für das Gesicht)**



**Braun/Dunkelbraun 1-3 (maximal 2 für das Gesicht)**

## Hauttest

Wir empfehlen, das Gerät vor der ersten Behandlung an einer kleinen Hautstelle zu testen, um Ihre Reaktion zu überprüfen. Die Fläche sollte ca. Die Größe beträgt ca. 2 x 3 cm und entspricht der Größe von zwei Blitzen nebeneinander. Warten Sie 48 Stunden, um den Testbereich zu untersuchen.

Wenn Ihre Haut normal aussieht, beginnen Sie mit der ersten Behandlung. Wenn bei Ihnen eine Hautreaktion auftritt, müssen Sie die Verwendung des Geräts beenden und Ihren Arzt konsultieren. Vermeiden Sie es, die getestete Stelle mindestens eine Woche nach dem Test zu behandeln.

## Behandlungsplan

Die Anlaufphase beträgt 12 Wochen, in diesem Zeitraum sollten Sie die Behandlung einmal pro Woche durchführen. Sie können die Behandlung beenden und in den Wartungsmodus wechseln, wenn Sie innerhalb von 12 Wochen gute Ergebnisse sehen. Im Wartungsmodus behandeln Sie je nach Bedarf alle 1-2 Monate die gewünschte Stelle. Der typische Haarwachstumszyklus variiert von Person zu Person und kann je nach Körperregion (Unterarm, Unterschenkel, Bikinizone) bis zu 16 Wochen dauern.

Nur Haare in der Wachstumsphase sind für eine Lichtbehandlung geeignet. Daher ist es wichtig, mehrere Behandlungen durchzuführen, um eine dauerhaft glatte Haut zu erzielen.

## Gesichtsbehandlung

Bevor Sie Ihr Gesicht behandeln, stellen Sie sicher, dass Sie einen Hauttest durchgeführt haben. Entfernen Sie Haare und Kosmetika,

- Cremes und Seren aus dem Bereich.
- Schließen Sie vor dem Drücken der Behandlungstaste die Augen oder schauen Sie weg, um helles Licht zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, denselben Bereich zweimal zu behandeln, da dies das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen kann.
- Vermeiden Sie bei der Behandlung des Oberlippenbereichs den Kontakt mit Lippen und Nasenlöchern. Der zentrale Bereich unter den Nasenlöchern kann empfindlich sein. TIPP: Sie können Ihre Lippen zusammendrücken, um sicherzustellen, dass das Licht nicht auf der Oberlippe selbst aktiviert wird.
- Unter dem Kinn kann der Haarwuchs dichter und gröber sein. Dies kann nach einer Behandlung manchmal zu leichten Hautrötungen führen. Diese Rötung ist vorübergehend und sollte nach 24 Stunden vollständig verschwinden.

## Nach der Behandlung

Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose.

Wir empfehlen, künstliche Lichtquellen wie Solarien zu meiden. Vermeiden Sie 24 Stunden nach der Behandlung Aktivitäten oder Hautprodukte, die Ihre Haut reizen könnten.

Dazu gehören die Nutzung eines Whirlpools oder einer Sauna, die Verwendung enganliegender Kleidung, die Verwendung von Bleichcremes, parfümierten Produkten oder Peelingprodukten. Dies kann zu Reizungen wie Juckreiz und Rötungen an den behandelten Stellen führen.

## Mögliche Nebenwirkungen

- Bei manchen Menschen kann es zu einem gewissen Maß an Unbehagen kommen, z.B. Hitze, Rötung oder Kribbeln der Haut bei der Verwendung des Geräts sind normal. Die Reaktionen verschwinden normalerweise innerhalb von 24 Stunden.

Die Nebenwirkungen treten normalerweise sofort auf oder treten innerhalb von 24 Stunden auf. In seltenen Fällen kann es bis zu 72

- Stunden dauern, bis sie angezeigt werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn bei Ihnen ungewöhnliche Hautreaktionen auftreten. Das Wärme- oder Kribbeln während der Behandlung verschwindet in der Regel nach einigen Sekunden bis zu einer Minute und lässt bei fortgesetzter Anwendung nach. Dies ist bei allen IPL-Behandlungen zu erwarten und normal. Sie können das Gerät weiterhin wie beschrieben verwenden.

- Starke Schmerzen oder Beschwerden während der Behandlung oder anhaltende Schmerzen nach einer Behandlung. Wenn dies geschieht, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.

Rötungen während oder nach der Behandlung, die innerhalb von

- Minuten oder bis zu mehreren Stunden verschwinden. Dies ist bei allen IPL-Behandlungen zu erwarten und normal. Wenn die Rötung der Haut verschwunden ist, können Sie das Gerät wie beschrieben weiter verwenden.

Wenn die Rötung nicht innerhalb von 24 – 48 Stunden nach der Behandlung verschwindet, beenden Sie die Verwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt.

## Seltene Nebenwirkungen

- Schwellung und Rötung um den Haarfollikel, die innerhalb von zwei bis drei Tagen verschwindet. Sie können das Gerät wie angegeben weiter verwenden, wenn die Schwellung und/oder Rötung um den Haarfollikel verschwunden ist.
- Schwellung und Rötung um den Haarfollikel herum, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen verschwindet. Beenden Sie die Verwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.
- Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (heller oder dunkler).
- Wenn sich Ihre Hautfarbe ändert, müssen Sie die Verwendung des Geräts beenden und Ihren Arzt konsultieren.
- Zunahme des Haarwuchses in Behandlungsgebieten (häufiger bei Menschen aus dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten und Südostasien). Wenn dieser Anstieg über mehrere Behandlungen hinweg anhält, müssen Sie die Verwendung des Geräts beenden und Ihren Arzt konsultieren.

To read the user manual in a different language,  
scan this QR code or go to [osmousermanual.com](https://osmousermanual.com)



We're at work 6 days a week, ready to help you out.

**silkier.**