


harmonix

Awakening Sound and Speech

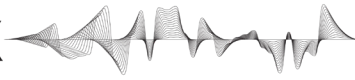

PL

Seria TravelerAI



Instrukcja obsługi etui ładującego LCD

T110-BLK


T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-PL

August 2025

harmonix

Awakening Sound and Speech

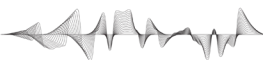

harmonix.is
harmonixhearing.com

Działanie komory ładowania



Podświetlenie ekranu wyświetlacza

Metoda 1: Otwórz pokrywę komory ładowania, wyświetlacz zaświeci się automatycznie.

Metoda 2: Gdy ekran jest wyłączony, kliknij ekran wyświetlacza, aby go włączyć.

Metoda 3: Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny znajdujący się pod etui ładującym, aby podświetlić ekran.

Wyłącz ekran wyświetlacza

Automatyczne wyłączenie: Po włączeniu ekranu na 30 sekund bez działania. Ekran wyświetlacza wyłączy się automatycznie.

Zamykanie ręczne: Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny etui ładującego, aby wyłączyć ekran wyświetlacza.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu należy aktywować zasilanie

Metoda 1. Naładuj i aktywuj etui ładujące przez interfejs TYPE-C.

Metoda 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na etui ładującym przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie

Wskazówka: Ten produkt domyślnie przechodzi w tryb wyłączenia, gdy opuszcza fabrykę. Pierwsze użycie wymaga aktywacji i konfiguracji.

Interfejs ekranu blokady

Odblokuj: Przesuń w prawo, aby odblokować ekran



Interfejs muzyczny



Ostatnia piosenka Odtwórz / Wstrzymaj piosenkę Następna piosenka

Interfejs regulacji głośności



Zmniejsz głośność, minimalna głośność to 0

Zwiększ głośność, maksymalna głośność to 16

Interfejs dźwięku kosmicznego



Tryb muzyczny

Tryb filmu

Tryb gry

Interfejs korektora



Przełączaj się między różnymi efektami dźwiękowymi korektora: Normalny, Rock, Pop, Klasyczny, Jazz

Interfejs alarmu timera



Przełączanie wymaga ustawienia czasu alarmu odliczania: 5 minut, 10 minut, 30 minut, 60 minut

Interfejs poziomu światła



Kliknij lewy przycisk, aby zmniejszyć jasność ekranu. Kliknij przycisk po prawej stronie, aby zwiększyć jasność ekranu.

Interfejs zmiany języka



Kliknij, aby zmienić język


Interfejs funkcji Znajdź moje słuchawki



Kliknij przycisk L/R, a pojawi się 1



Kliknij, aby anulować i wyjść z tej funkcji
Kliknij, aby rozpocząć, pojawi się cyfra 2, a głośnik słuchawek zacznie emitować dźwięk

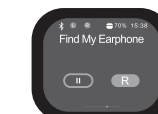

Kliknij przycisk zatrzymania, aby zatrzymać alert

Funkcja przewracania stron Tiktok

Musi być podłączony do bezprzewodowego urządzenia słuchawkowego, takiego jak telefon komórkowy.

1. Ta funkcja jest dostępna tylko do użytku z oprogramowaniem TIKTOK i innym oprogramowaniem, z którym wiele nie działa.
2. Ta funkcja może mieć problemy ze zgodnością z niektórymi telefonami, a niektóre telefony mogą nie być w stanie z niej korzystać.
3. Jeśli są sytuacje, w których nie można z niego skorzystać, zignoruj tę funkcję



Kliknij tę ikonę, bieżący krótki film zostanie polubiony

Kliknięcie tej ikony spowoduje przejście do poprzedniego krótkiego filmu

Kliknięcie tej ikony spowoduje przejście do następnego krótkiego filmu

Interfejs latarki



OPEN

Kliknij przycisk, aby włączyć latarkę, cały ekran zmieni kolor na biały, a jasność ekranu wzrośnie.

Funkcja fotograficzna

Musi być podłączony do bezprzewodowej słuchawki, takiej jak telefon komórkowy

1. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku robienia zdjęć za pomocą wbudowanego aparatu w telefonie. Inne programy do fotografowania mogą nie być w stanie z niego korzystać.
2. Ta funkcja może mieć problemy ze zgodnością, a niektóre telefony mogą nie być w stanie z niej korzystać.
3. Jeśli są sytuacje, w których nie można z niego skorzystać, zignoruj tę funkcję.



Otwórz aparat w telefonie, kliknij przycisk, a telefon zacznie robić zdjęcia.

Uwaga: gdy nie jest w trybie fotografowania, kliknięcie tego przycisku zdjęcia zwiększy głośność.

Definicja funkcji przycisków wielofunkcyjnych.



Multifunction key

Kliknij raz: ekran wł./wył.

Długie naciśnięcie przez 3 sekundy: W trybie włączania naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, a na ekranie pojawią się ikony wyłączenia i ponownego uruchamiania.

Kliknięcie ikony może spowodować zamknięcie lub ponowne uruchomienie.

Długie naciśnięcie przez 8 sekund: W trybie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund: Uruchom ponownie system (na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy)

Tę operację można wykonać, gdy system ulegnie awarii i nie będzie można go obsługiwać.

harmonix.is
harmonixhearing.com

Łącze do obsługi klienta Harmonix



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA