


**harmonix**

Awakening Sound and Speech

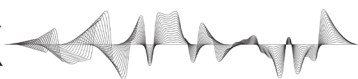

**SE**

# TravelerAI-serien



## Manual för LCD-laddningsfodral

T110-BLK


T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-SE

August 2025

**harmonix**

Awakening Sound and Speech

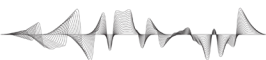

harmonix.is  
harmonixhearing.com

## Användning av laddningsfack



### Lyser upp skärmen

**Metod 1:** Öppna locket till laddningsfacket, displayen tänds automatiskt.

**Metod 2:** När skärmen är avstängd klickar du på skärmen för att vrida den.

**Metod 3:** Tryck på multifunktionsknappen under laddningsfodralet en gång för att lysa upp skärmen.

### Stäng av skärmen

Automatisk avstängning: Efter att ha slagit på skärmen i 30 sekunder utan användning. Skärmen stängs av automatiskt.

Manuell stängning: Tryck på laddningsfodralets multifunktionsknapp en gång för att stänga av skärmen.

### Obs: Första gången du använder den, vänligen aktivera strömmen

Metod 1. Ladda och aktivera laddningsväskan via TYPE-C-gränssnittet.

Metod 2. Tryck länge på multifunktionsknappen på laddningsfodralet i 5 sekunder för att slå på enheten

Tips: Den här produkten går som standard i avstängningsläge när den lämnar fabriken. Första användningen kräver aktivering och inställning

### Gränssnitt för låsskärm

Lås upp: Skjut åt höger för att låsa upp skärmen



### Gränssnitt för musik



◀ Sista låten   Spela / Pausa   ▶  
▶ Nästa låt

### Gränssnitt för volymjustering



◀ Minska volymen, minsta volym är 0   ▶ Öka volymen, maximal volym är 16

### Gränssnitt för rymdljud



Musikläge   Filmkläge   Spelläge

### Gränssnitt för equalizer



Växla mellan olika EQ-ljudeffekter: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz

### Gränssnitt för timerlarm



Växling kräver att nedräkningsalarmtiden ställs in: 5 minuter, 10 minuter, 30 minuter, 60 minuter

### Gränssnitt för ljusnivå



Klicka på den vänstra knappen för att minska skärmens ljusstyrka. Klicka på knappen till höger för att öka skärmens ljusstyrka.

### Gränssnitt för språkbyte




Klicka för å bytte språk

### Hitta mitt hörlursgränssnitt



Klicka på L/R-knappen så visas 1:an

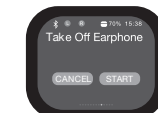

Klicka för att avbryta och avsluta den här funktionen  
Klicka för att starta, siffran 2 kommer att visas och hörlurshögtalaren börjar avge ljudet



Klicka på stoppknappen för att stoppa varningen

## Funktion för att vända Tiktok-sida

Måste anslutas till en trådlös telefon, t.ex. en mobiltelefon.

1. Denna funktion är endast tillgänglig för användning med TIKTOK-programvara, och andra program fungerar ofta inte med den.
2. Den här funktionen kan ha kompatibilitetsproblem med vissa telefoner, och vissa telefoner kanske inte kan använda den.
3. Om det finns situationer där den inte kan användas, vänligen ignorera den här funktionen



Klicka på den här ikonen, den aktuella korta videon kommer att gillas



Om du klickar på den här ikonen växlar du till föregående korta video

Genom att klicka på den här ikonen växlar du till nästa korta video

## Gränssnitt för ficklampa



OPEN

Klicka på knappen för att tända ficklampan, hela skärmen blir vit och skärmens ljusstyrka ökar.

## Funktion för fotografering

Måste anslutas till en trådlös telefon, t.ex. en mobiltelefon

1. Den här funktionen är endast tillgänglig för att ta bilder med telefonens inbyggda kamera. Andra fotograferingsprogram kanske inte kan använda den.
2. Den här funktionen kan ha kompatibilitetsproblem, och vissa telefoner kanske inte kan använda den.
3. Om det finns situationer där den inte kan användas, vänligen ignorera den här funktionen.



Öppna telefonens kamera, klicka på knappen och telefonen börjar ta bilder.

Notera: när du inte är i fotograferingsläge ökar volymen genom att klicka på den här fotoknappen.

## Definition av multifunktionella knappars funktion.



Multifunction key

Klicka en gång: På/av skärmen

Långt tryck i 3 sekunder: I påslagningsläge, tryck länge i 3 sekunder, och skärmen kommer att dyka upp avstängnings- och omstartskon.

Genom att klicka på ikonen kan du stänga av eller starta om.

Långt tryck i 8 sekunder: I avstängt läge, tryck länge i 8 sekunder för att slå på enheten.

Tryck länge i 10 sekunder: Starta om systemet (displayen visar startskärmen)

Denna operation kan utföras när systemet kraschar och inte kan användas.

harmonix.is  
harmonixhearing.com

## Harmonix kundtjänstlänk



**Harmonix ehf.**  
Reykjavíkurvegur 64,  
220 Hafnafjörður  
Iceland

**Harmonix Technologies LLC**  
200 Crandon Blvd.,  
Key Biscayne,  
FL 33149,  
USA