


**harmonix**

Awakening Sound and Speech

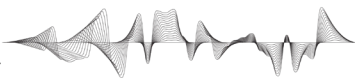

**NL**

# TravelerAI-serie



## Handleiding LCD-oplaadetui

T110-BLK


T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-NL

August 2025

**harmonix**

Awakening Sound and Speech

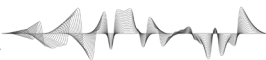

harmonix.is  
harmonixhearing.com

## Werking oplaadcompartiment



### Het beeldscherm verlichten

**Methode 1:** Open het deksel van het oplaadcompartiment, het display licht automatisch op.

**Methode 2:** Als het scherm is uitgeschakeld, klikt u op het scherm om het in te schakelen.

**Methode 3:** Druk eenmaal op de multifunctionele knop onder de oplaadcassette om het scherm te verlichten.

### Beeldscherm uitschakelen

Automatische uitschakeling: Na het scherm 30 seconden zonder bediening aan te zetten. Het beeldscherm wordt automatisch uitgeschakeld.

Handmatig sluiten: Druk eenmaal op de multifunctionele knop van de oplaadcase om het scherm uit te schakelen.

### Let op: Activeer de stroomvoorziening bij het eerste gebruik.

Methode 1. Laad de oplaadcase op en activeer deze via de TYPE-C-interface.

Methode 2. Houd de multifunctionele knop op de oplaadcase 5 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Tip: Dit product staat standaard in de uitschakelmodus wanneer het de fabriek verlaat. Voor het eerste gebruik is activering en installatie vereist.

## Interface op het vergrendelscherm

Ontgrendelen: Schuif naar rechts om het scherm te ontgrendelen



### Muziek interface



◀ ▶ ▶  
Laatste liedje    Afspelen / Volgende nummer  
                  pauzeren

### Interface voor volumeregeling



◀ ▶  
Verlaag het volume, het minimale volume is 0    Verhoog het volume, het maximale volume is 16

## Ruimte geluidsinterface



🎵    🎮  
Muziekmodus    Spelmodus  
Filmmodus

## Equalizer-interface



Schakelen tussen verschillende EQ-geluidseffecten: Normaal, Rock, Pop, Klassiek, Jazz

## Timer Alarm-interface



Om te schakelen moet de aftelalarmtijd worden ingesteld: 5 minuten, 10 minuten, 30 minuten, 60 minuten

## Interface voor lichtniveau



Klik op de linkerknop om de helderheid van het scherm te verlagen. Klik op de knop aan de rechterkant om de helderheid van het scherm te verhogen.

## Interface voor taalwisseling



◀ ▶  
Klik om van taal te wisselen


## Vind mijn oortelefooninterface



L    R  
Klik op de L/R-knop en de 1 verschijnt



1  
Klik om deze functie te annuleren en af te sluiten. Klik om te beginnen, het cijfer 2 verschijnt en de luidspreker van de hoofdtelefoon begint het geluid uit te zenden

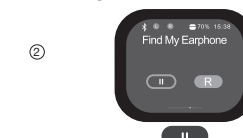


2  
Klik op de stopknop om de melding te stoppen

## Tiktok Page Flipping-functie

Moet zijn verbonden met een draadloze handset, zoals een mobiele telefoon.

1. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruik met TIKTOK-software en andere software die er vaak niet mee werkt.
2. Deze functie kan compatibiliteitsproblemen hebben met sommige telefoons en sommige telefoons kunnen deze mogelijk niet gebruiken.
3. Als er situaties zijn waarin het niet kan worden gebruikt, negeer deze functie dan

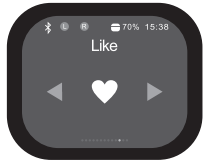

Klik op dit pictogram, de huidige korte video wordt geliked



Als u op dit pictogram klikt, gaat u naar de vorige korte video

Als u op dit pictogram klikt, gaat u naar de volgende korte video

## Fotografie functie

Moet zijn verbonden met een draadloze handset, zoals een mobiele telefoon

1. Deze functie is alleen beschikbaar voor het maken van foto's met de ingebouwde camera van de telefoon. Andere opnamesoftware kan het mogelijk niet gebruiken.
2. Deze functie kan compatibiliteitsproblemen hebben en sommige telefoons kunnen deze mogelijk niet gebruiken.
3. Als er situaties zijn waarin het niet kan worden gebruikt, negeer deze functie dan.



Open de camera van de telefoon, klik op de knop en de telefoon begint met het maken van foto's.

Opmerking: als u niet in de opnamemodus bent, klikt u op deze fotoknop om het volume te verhogen.

## Definitie van multifunctionele knoppenfunctie.



Multifunction key

Klik één keer: Aan/Uit scherm

3 seconden lang indrukken: Houd in de ingeschakelde modus 3 seconden lang ingedrukt en het scherm verschijnt met pictogrammen voor afsluiten en opnieuw opstarten.

Door op het pictogram te klikken, kunt u worden afgesloten of opnieuw worden opgestart.

8 seconden lang indrukken: Houd in de afsluitmodus 8 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

10 seconden lang ingedrukt houden: Start het systeem opnieuw op (display toont opstartscherm)

Deze handeling kan worden uitgevoerd wanneer het systeem crasht en niet kan worden bediend.

harmonix.is  
harmonixhearing.com

## Harmonix Klantenservice Link



**Harmonix ehf.**  
Reykjavíkurvegur 64,  
220 Hafnafjörður  
Iceland

**Harmonix Technologies LLC**  
200 Crandon Blvd.,  
Key Biscayne,  
FL 33149,  
USA