

SaeboFlex[®]

قفاز سیبو فلکس



Saebo
Leaders In Stroke Rehabilitation

المقدمة:

سيبو فلкс هو جبيرة مخصصة للأصابع و اليد ديناميكية مفصلية (WHFO). يتم تحريك الإصبع والإبهام في الانثناء والكابل مدفوعة في التمديد. تخدم الجبيرة غرضًا مزدوجًا: دعم اليد في وضع وظيفي و دمج اليد في الأنشطة الوظيفية

الفوائد:

- مصممة لدعم المعوقين عصبياً وجعل الرسغ واليد الإبهام والأصابع في وضع وظيفي
- يساعد على منع وتصحيح تقلصات الرسغ واليد الإبهام والأصابع
- يحافظ ويحسن نطاق الحركة في اليد ، الإبهام ، الأصابع وفي جميع أنحاء الطرف العلوي بأكمله
- يحسن قوة المعصم واليد والإبهام والأصابع في جميع أنحاء الطرف العلوي بأكمله
- يساعد في أداء أنشطة القبض والافلات الوظيفية باستخدام الذراع / اليد المصابة

التمرکز:

عند ارتداء سيبو فلкс لتحديد الموقع، يجب على المريض زيادة وقت الارتداء تدريجياً. (يجب مراقبة هذا من قبل معالج مرخص / أخصائي رعاية صحية). هذا ينبغي أن يكون خلال ساعات الاستيقاظ، لا ينصح بذلك يتم ارتداء سيبو فلкс أثناء النوم.

الأنشطة الوظيفية:

نقترح ان يكون هناك جلستان يوميا لمدة 45 دقيقة تحتوي على أنشطة المسك والإفلات.
استشير اخصائي سايبو لكي يساعدك على معرفة أفضل الطرق التي تكون مناسبة لاحتياجاتك الخاصة.
بعد كل جلسة، يجب إزالة الجهاز ل 30 دقيقة على الأقل. يمكن أداء جلسات تزيد عن 45 دقيقة يوميا..

دواعي الاستعمال:

- سكتة دماغية
- إصابات الدماغ الصادمة (T.B.I).
- إصابة الحبل الشوكي غير كاملة
- الشلل الدماغي
- الأفراد الذين يعانون من شلل نصفي

موانع الاستعمال:

- تشوهات شديدة في الأصابع والإبهام

- أي نوع من أنواع التهاب المفاصل في الأصابع أو الإبهام
- اذا منع الحد من التقلصات الثابتة في الأصابع والإبهام والمعصم
- تورم شديد في الساعد و / أو اليد
- الجروح المفتوحة أو المناطق المصابة
- لم يتم تصميم سيبو فلكس للاستخدام على يد عادية
لأن القطع المقاومة الديناميكية لم يتم معايرتها
استيعاب النغمة العادية ولن يكون لها فائدة وظيفية.

الاحتياطات:

1. إذا واجهت أي ألم أثناء ارتداء أو استخدام سيبو فلكس ، توقف فورًا واتصل بالرعاية الصحية محترف قبل الاستئناف.
2. إذا كان التورم غير عادي ، وتغير لون الجلد ، وعدم الراحة ، أو يحدث خدر ، قم بإزالته على الفور واتصل بصحة الرعاية المهنية قبل استئناف.

3. تجنب ارتداء سيبو فلكس لأكثر من 45 دقيقة في الساعة الوقت أثناء دمجها وظيفيا.
4. يجب أن يتناسب سيبو فلكس بشكل مناسب ، ولكن بشكل مريح ، بدون التدخل في الدورة الدموية.
5. لا تدع الأطفال غير الخاضعين للرقابة يلعبون مع سيبو فلكس كـ هناك أجزاء صغيرة إذا تم إزالتها قد تسبب الاختناق إذا ابتلعت.

اعمال صيانة:

- يجب تنظيف سيبو فلكس بقطعة قماش مبللة والسماح لها مجفف هواء. تجنب المواد الكيميائية / المواد الكاشطة للتنظيف والتي قد تتلف وخفض أداء سيبو فلكس.
- الإنجاز في سيبو فلكس:
- من المهم أن يفهم المريض و / أو مقدم الرعاية كيفية القيام بذلك يوضع بشكل صحيح على جبيرة ويتم ارتدائه سيبو فلكس. يجب أن يكون سيبو فلكس في نفس الموقع في كل مرة لضمان الصحيح أداء. فيما يلي الخطوات المقترحة للارتداء سيبو فلكس. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق سيبو فلكس ، يرجى الاتصال بطبيبك المعالج أو الاتصال بفنينا السريري فريق الدعم على 5433-284-888.
- الخطوة رقم 1: تأكد من جميع الأشرطة الثلاثة (اثنان من الساعد ويد واحدة حزام) تم فكها.
- الخطوة رقم 2: ضع إبهامك على العظم عند الرسغ (رأس الزندي) (رسم بياني 1). ضع سيبو فلكس على الساعد. تأكد من البعد حافة (السدادة الأقرب إلى الرسغ) هي أعلى الصدفة العظم عند الرسغ (الشكل 2)

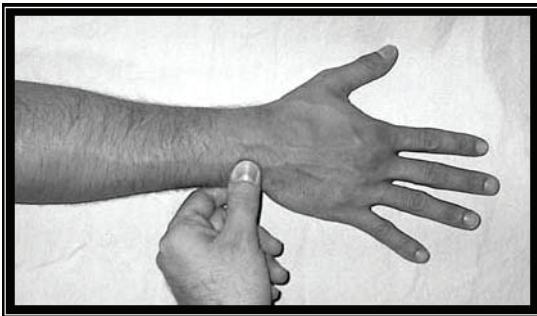


Fig #1


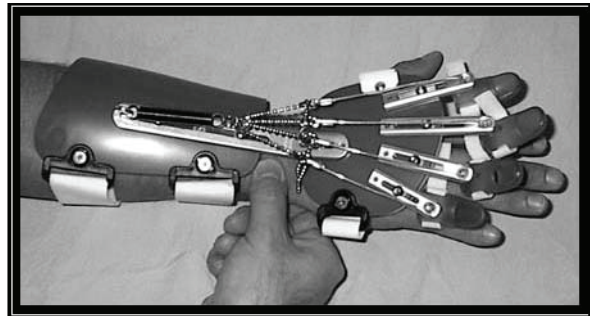



Fig #2

الخطوة رقم 3: بمجرد أن يكون غلاف الساعد في الموضع الصحيح،
ثبت حزامي الساعد. تأكد من أنها آمنة حتى
قشرة الساعد لا تنتقل إلى أسفل على عظم الرسغ
(الصورة 2).

الخطوة رقم 4: من أجل تطبيق حزام اليد ، ضع ظهر اليد
والأصابع ضد قطعة اليد. بمجرد وضعهم مع
يتم تثبيت حزام اليد في منتصف اليد

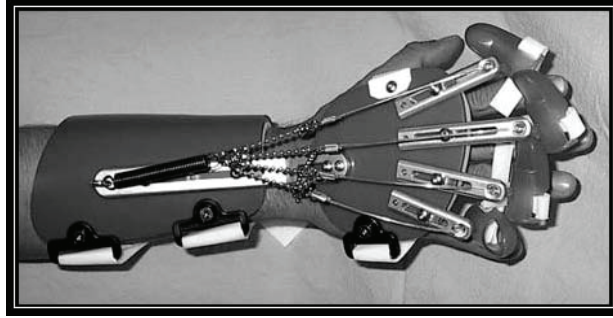


الخطوة رقم 5: عندما تكون الأشرطة الثلاثة محكمة ، قم بإزالة زنبرك الإصبع
من الخطاف على ممسك المعصم الموجود على الساعد
تحريك الخطاف نصف دورة بحيث تواجه الفتحة إلى الجانب.
قم بإزالة الزنبك مع ترك أغطية الخانات تسقط

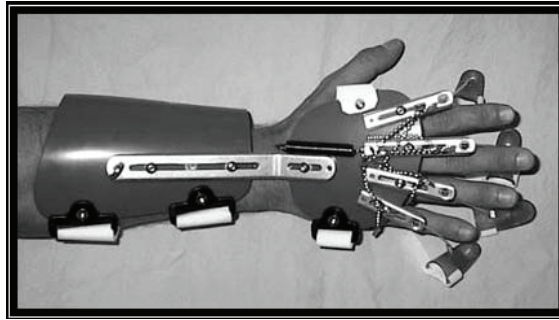

الخطوة رقم 6: بدء بإصبع السبابة والانتهاء بالخنصر ،
حرك كل إصبع في غطاء الرقم المناسب. تأكد من أن
يأتي طرف الإصبع في نهاية غطاء الرقم، قد تكون هذه الخطوة صعبة لبعض
الأشخاص.

في البداية، قد يكون من الضروري فتح حزام الفيلكرو الأبيض
يحمل الغطاء الرقم بإحكام على الإصبع ولكن بعد ذلك، سيكون
ممكن انزلاق الإصبع في غطاء الرقم دون فتح
الأشرطة الفيلكرو. قم بتقليم أي طول زائد من أحزمة غطاء الرقم. (بك
يجب أن يقوم المعالج بقص هذه الأشرطة في العيادة

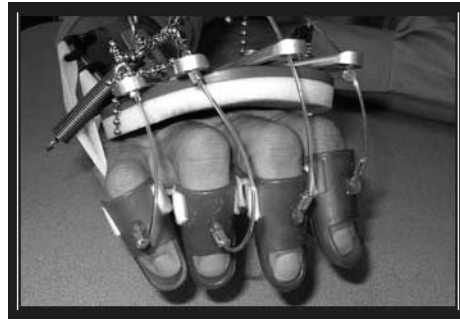

الخطوة رقم 7: بمجرد وضع القبعات الأربعة المكونة بأمان على الأصابع، قم بتقريب الاصابع
(الشكل رقم 3). أعد تثبيت
نابض الاصبع على خطاف العين على مسكة المعصم الموجود على
الساعد (الشكل رقم 4).

يجب توخي الحذر لتجنب سحب الأصابع لأعلى مع النابض
هذه الممارسة قد تفرط في الضغط على النابض أو تسحب الحلقة المنقسمة)
حلقة مستديرة في نهاية النابض).

نقترح عليك مد الأصابع والاحتفاظ بها في التمديد
وضعها على فخذك أو طاولة

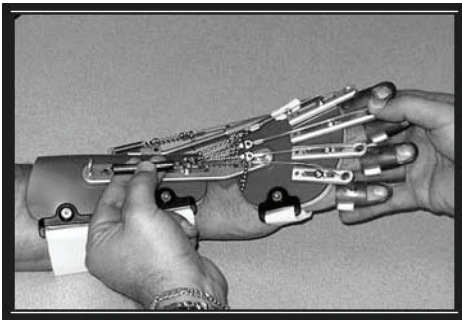


Fig #3

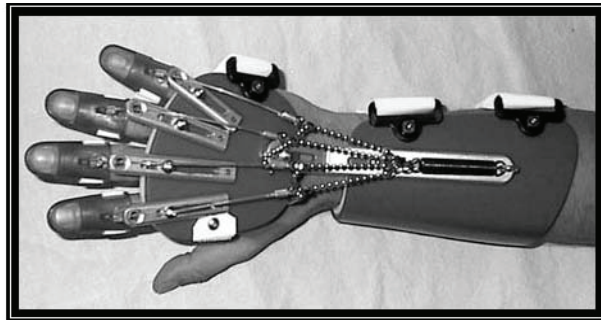


Fig #4

الخطوة رقم 8: لتطبيق غطاء الإبهام ، قم بفك زنبرك الإبهام
المعلق على الإبهام على الساعد. دع الغطاء الرقم
تعلق نحو الإبهام



الخطوة # 9: حرك الإبهام في غطاء الرقم. تأكد من ان
الإبهام يصل الى نهاية (طرف) الجزء الداخلي من غطاء الرقم ولا
يمكن رؤية الفضاء



الخطوة رقم 10: بمجرد وضع غطاء رقم الإبهام بشكل آمن على الإبهام ،
أعد تركيب نابض الإبهام على حامل الإبهام. كن حذرا حتى لا يمتد النابض بازدياد



رعاية وتنظيف مجموعة أدوات سيبو فلكس و سيبوريتش من كيت ستايل

- يتم تصنيع أجهزة بأسلوب الطقم بحيث يمكن إزالة بطانات الرغوة واستبدالها ببطانات الرغوة البديلة المتوفرة في سيبو
- عدة. أحزمة بديلة للأغطية والقطع اليدوية والساعد و اغطية مدرجة أيضا.
- يمكن تنظيف ما تبقى من قطع / قطع بنفس الطريقة

بنفس محاليل التنظيف المستخدمة لمعدات ولوازم إعادة التأهيل الأخرى مثل السابق.

- رش أو تطبيق محلول على قطعة قماش نظيفة ومسح.
- إذا تم استخدام الجهاز عدة مرات فقط ، يتم إغلاق البطانة الرغوية ، يمكن إعادة استخدامها بعد المسح والتنظيف مع استخدام نفسه المحلول.

رعاية وتنظيف سيبو فلكس و سيبو ريتش ملفقة مخصصة

- استخدام سائل مطهر أو بخاخ آخر في المستشفى
- يوضع على قطعة قماش نظيفة ويمسح.
- الحشو الرغوي عبارة عن خلية مغلقة وغير ماصة ويمكن مسحه أيضا مع محلول تنظيف مطهر وكذلك باستخدام قطعة قماش نظيفة



www.saebo.com
888-284-5433



With Saebo . . . There Is No Plateau In Sight®