

تعليمات Saebo Step




فك الجهاز

- (1) دعامة
- (2) خطاف العيينة
- (2) مسامير مقاس 16/5 بوصة
- (2) 1/4 " فواخي
- (2) 3/8 " فواخي
- (2) غسالات



أجزاء من السوار

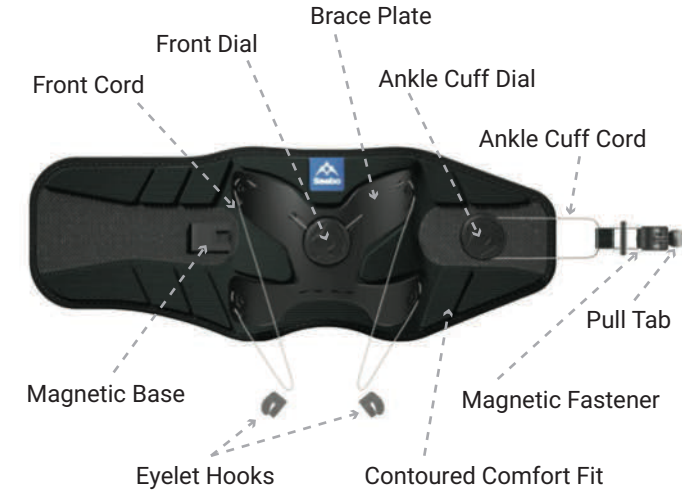

1

فتح حزام الكاحل



قم بفك كفة الكاحل أيضًا ،
قم بتدوير قرص الكاحل في
عكس اتجاه عقارب الساعة.



أمسك لسان السحب واسحب حتى
ينفصل المشبك المغناطيسي عن القاعدة.

2

موضع الجهاز



ضع Saebo Step حول الكاحل
مع وضع القرص الأمامي في المنتصف
على جذائك وشعار Saebo الأزرق في الأعلى.

3

ربط حزام الكاحل الآمن



أمسك لسان سحب متصل
بنهاية حبل الكاحل وقم بتوصيله
بقاعدة مغناطيسية.
سوف تسمع نقرة عند تأمينها.



أمسك لسان سحب متصل
بنهاية حبل الكاحل وقم بتوصيله
بقاعدة مغناطيسية.
سوف تسمع نقرة عند تأمينها.

تابع ربط حزام الكاحل الآمن




ملحوظة 1: تأكد من أن حبل الكاحل غير ملتوي.



ملاحظة 2: يجب أن يتداخل الحوام الموجود على
جانب القرص مع الكفة على الجانب المغناطيسي.

4

إرفاق خطافات الجفن

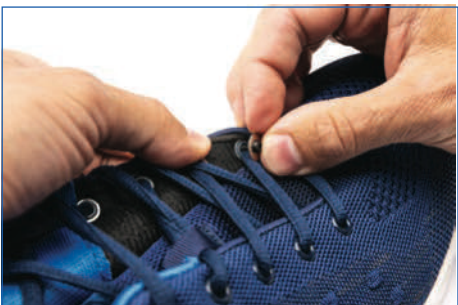

أدخل البرغي والغسالة
المناسبين في فتحة الحذاء.



ثبت رأس البرغي بإصبعك
أثناء لف خطاف العيينة
بإحكام بيد أخرى.
ضع الطرف المفتوح لخطاف
العيينة في اتجاه مقدمة الحذاء

5

سلك أمامي مفكوك



أدر الطلب الأمامي عكس
اتجاه عقارب الساعة.



اسحب الحبال الأمامية اليمنى واليسرى ،
بشكل مثالي في نفس الوقت ، إلى أسفل
نحو الحذاء.

6

قم بتوصيل السلك بمشبك ربط الجفن



اربط الحبل في فتحات خطاف العيينة.

7

شد الحبل الأمامي



قم بلف القرص عن طريق تدويره في اتجاه
عقارب الساعة حتى يتم إحكام السلك
الذهبي وتحصل على الرفع والزاوية المرغوبة.

باستخدام يد واحدة



- 4 قم بتدوير الدعامة للخلف إلى الموضع
الصحيح بحيث يكون شعار Saebo مواجهًا للأمام.
- 5 قم بإبقاء شد حبل الكاحل عن طريق
لف قرص الكاحل في اتجاه عقارب الساعة
حتى تشعر بتناسب مريح.

شاهد مقاطع الفيديو

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لمشاهدة مقاطع الفيديو
التعليمية بما في ذلك كيفية عمل نقوب جديدة في أي نوع
من الأحذية عمليًا.

www.saebo.com/saebostep

استشر طبيبك بخصوص حالتك واستخدام هذه الدعامة.



Saebo, Inc.
2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208

888-942-5751
sales@saebo.com
www.saebo.com



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.
info@europeandevicesolutions.co.uk
www.europeandevicesolutions.co.uk

Australian Sponsor:
Ausmedic Australia Pty Ltd
Unit 3, 3 Basalt Road Pemulwuy NSW
2145 1300 473 422
Performhealth.com.au

