


INSTRUCCIONES
SaeboStep

DESEMPACAR EL DISPOSITIVO

- (1) Órtesis
- (2) Ganchos para ojales
- (2) Tornillos de 5/16"
- (2) Tornillos de 1/4"
- (2) Tornillos de 3/8"
- (2) Arandelas



PARTES DE LA ÓRTESIS

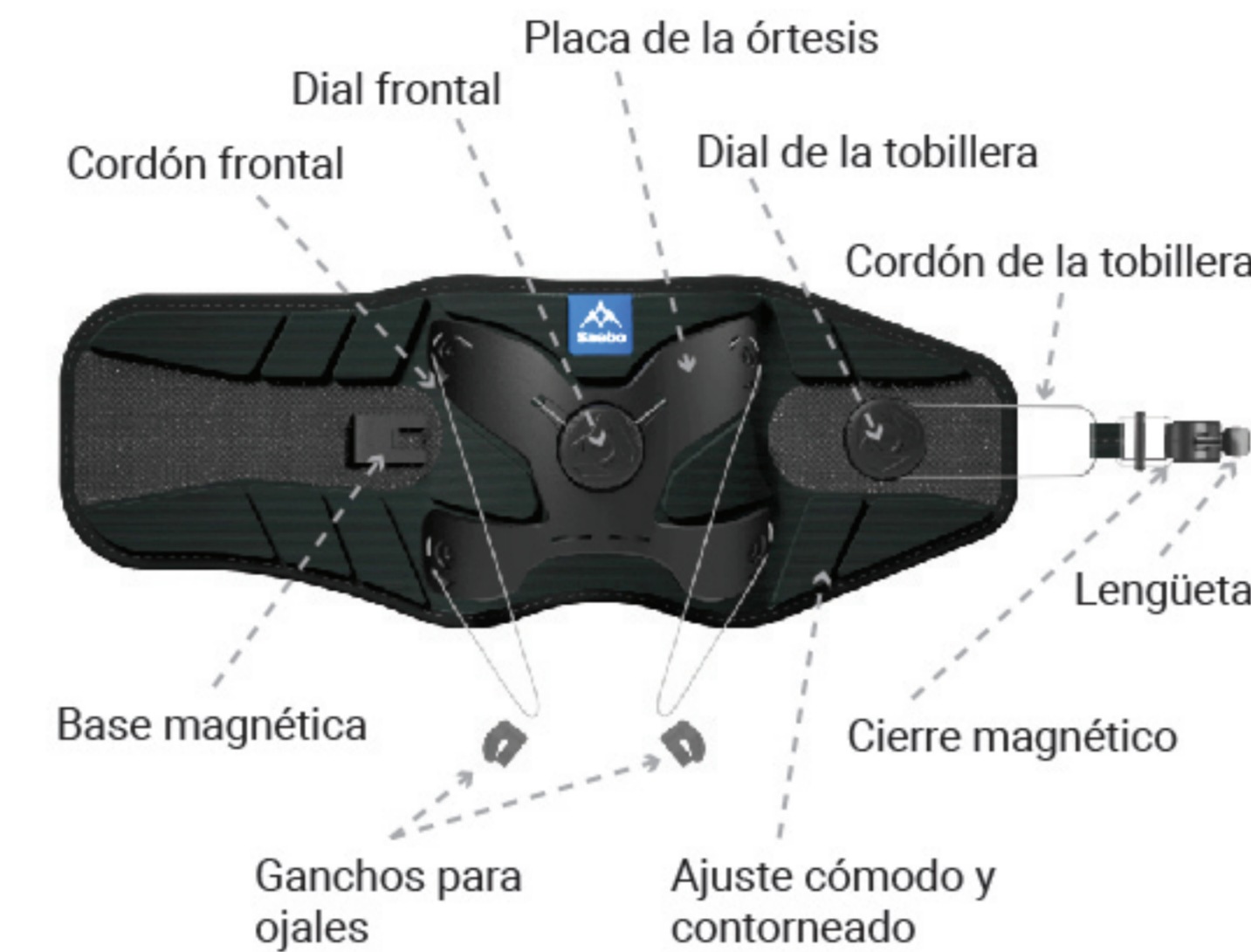

1

ABRIR LA TOBILLERA



Para aflojar el cordón de la tobillera, gire el dial de la tobillera en sentido opuesto a las agujas del reloj.



Coja la lengüeta y tire hasta que el cierre magnético se desconecte de la base.

2

COLOCAR EL DISPOSITIVO



Coloque el SaeboStep alrededor del tobillo con el dial frontal en el centro mirando hacia el calzado y el logotipo azul de Saebo ubicado en la parte superior.

3

ASEGURAR LA TOBILLERA



Coja la lengüeta que está unida al extremo del cordón de la tobillera y conéctela a la base magnética. Escuchará un clic cuando se haya asegurado correctamente.



Gire el dial de la tobillera en sentido de las agujas del reloj hasta que la tobillera se ajuste a la perfección.

ASEGURAR LA TOBILLERA (CONTINUACIÓN)



Nota 1: Asegúrese de que el cordón de la tobillera no esté retorcido.



Nota 2: El lado del dial de la tobillera debe superponerse con el lado magnético de la tobillera.

4

SUJETAR LOS GANCHOS PARA OJALES



Coloque los tornillos y las arandelas correspondientes dentro de los ojales del calzado.



Establezca la cabeza del tornillo con el dedo mientras enrosca el gancho para los ojales con la otra mano. Coloque la parte abierta del gancho para los ojales mirando hacia el frente del calzado.

5

AFLOJAR EL CORDÓN FRONTAL



Gire el dial frontal en sentido opuesto a las agujas del reloj.



Tire de los cordones frontales derecho e izquierdo, en lo posible al mismo tiempo, hacia abajo en dirección al calzado.

6

SUJETAR EL CORDÓN EN LOS GANCHOS PARA OJALES



Enganche los cordones en los ganchos para los ojales.

7

AJUSTAR EL CORDÓN FRONTAL



Gire el dial en sentido de las agujas del reloj hasta que el cordón frontal esté ajustado y obtenga la elevación y el ángulo que desea.

8

CON UNA MANO



1 Rote la tobillera de manera que el cierre magnético y el dial de la tobillera estén cerca del frente para acceder con mayor facilidad.

2 Sujete el cierre magnético a la base.

3 Ajuste el cordón de la tobillera girando el dial de la tobillera en sentido de las agujas del reloj.



4 Rote la tobillera nuevamente hacia la posición correcta con el logotipo de Saebo mirando hacia el frente.

5 Termine de ajustar el cordón de la tobillera girando el dial de la tobillera en sentido de las agujas del reloj hasta que sienta el ajuste perfecto.

VER LOS VÍDEOS

Visite nuestro sitio web para ver videos instructivos que explican cómo perforar nuevos ojales en prácticamente cualquier tipo de calzado.

www.saebo.com/saebostep

Consulte con su médico sobre su afección y el uso de esta órtesis.



Saebo, Inc.
2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208
888-942-5751
sales@saebo.com
www.saebo.com



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.
info@europeandevicesolutions.co.uk
www.europeandevicesolutions.co.uk

Australian Sponsor:
Ausmedic Australia Pty Ltd
Unit 3, 3 Basalt Road Pemulwuy NSW
2145 1300 473 422
Performhealth.com.au

